



Ganz nah am Menschen

www.rcn-medizin.com

40 Jahre Qualität



Pflege zum
Wohlfühlen



Duschhocker

8

Toilettensitzerhöhungen

13



Dusch- und Toilettenstühle

16

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle

22



Multifunktions-Dusch- und Toilettenrollstühle

35

Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl SCC 250 Comfort G

38



Gel-Sitzkissen

42

XXL-Produkte

44



Dusch- und Transportliegen

54



Produkte für die Reise

62

Produkte für Kinder

66



Gehwagen und Combo-Walker

72

Medikamenten- und Verbandmittelwagen

78



Hausinterne Logistik

86

MRSA- und Hygienewagen

118



Produktlinie für den MRT-Bereich

126

Ruhe- und Pflegestuhl RPS 480

136



Innovative Produkte

140

Warum RCN?

Ob multifunktionale Dusch- und Toilettenstühle, Gehwagen, Rollstühle, Duschhocker, XXXL-Stühle, Dusch- und Transportliegen, Wäsche- und Sammel-systeme oder Stationswagen – RCN bietet eine breite Produktpalette für Ihren Pflegealltag.

RCN Produkte bestehen aus Modulen, die aus einem besonders stabilen Spezialkunststoff gefertigt sind. Unsere XXXL-Modelle sind auf Wunsch bis 400 kg belastbar.

Durch das vielfältige Angebot an Ausstattungsoptionen, Polstermaterialien und Farben können Sie Ihr Produkt ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Funktionalität und Qualität finden Sie bei jedem unserer Produkte. Langlebigkeit, einfache Reinigung, hohe Belastbarkeit und ein geringes Eigengewicht sind nur ein paar herausragende Eigenschaften der RCN Produkte. Sie bieten Ihnen noch viel mehr ...

Gehen Sie auf Nummer sicher und entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“ von RCN.

- absolut nicht rostend
- individuell kombinierbar
- wirtschaftliche Sonderanfertigungen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf den RCN Spezial-kunststoff-Rahmen

Unser Vertriebsteam informiert Sie gerne auch vor Ort und erarbeitet darüber hinaus für Sie individuelle Lösungen. Zum besseren Kennenlernen unserer Produkte bieten wir Ihnen unseren kostenlosen Bemusterungsservice an.



Mit weniger sollten Sie sich nicht zufriedengeben!

Weil Erfahrung und Qualität zählen!



RCN Produkte sind:

- praxisorientiert und -erprobt
- besonders wartungsfreundlich konstruiert
- als wirtschaftliche Sonderanfertigungen lieferbar
- langlebig und TÜV-geprüft

Wir bieten:

- kurze Lieferzeiten
- individuelle Lösungen
- einen hervorragenden Kundenservice
- ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis

Welchen Anforderungen sollte ein Duschhocker genügen?


Sicher, komfortabel, leicht, hygienisch und absolut nicht rostend sollte er sein. Bei all unseren Duschhockern haben wir genau diese Anforderungen umgesetzt und optimiert, denn wir sind ganz nah an der Praxis und unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit mit den besten Hilfsmitteln.

- hoch stabil
- leicht zu reinigen
- Spezialfüße für maximale Rutsicherheit
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf den RCN Spezialkunststoff-Rahmen

DH 49 – Grundmodell

Unser Klassiker unter den Duschhockern – praktisch und preiswert. Trotz geringem Eigengewicht ist er außerordentlich stabil und belastbar bis 200 kg.

Sein ergonomisch geformter Sitz ist sehr komfortabel, und die zentrale Pflegeöffnung ermöglicht das bequeme Reinigen der Intimzonen.

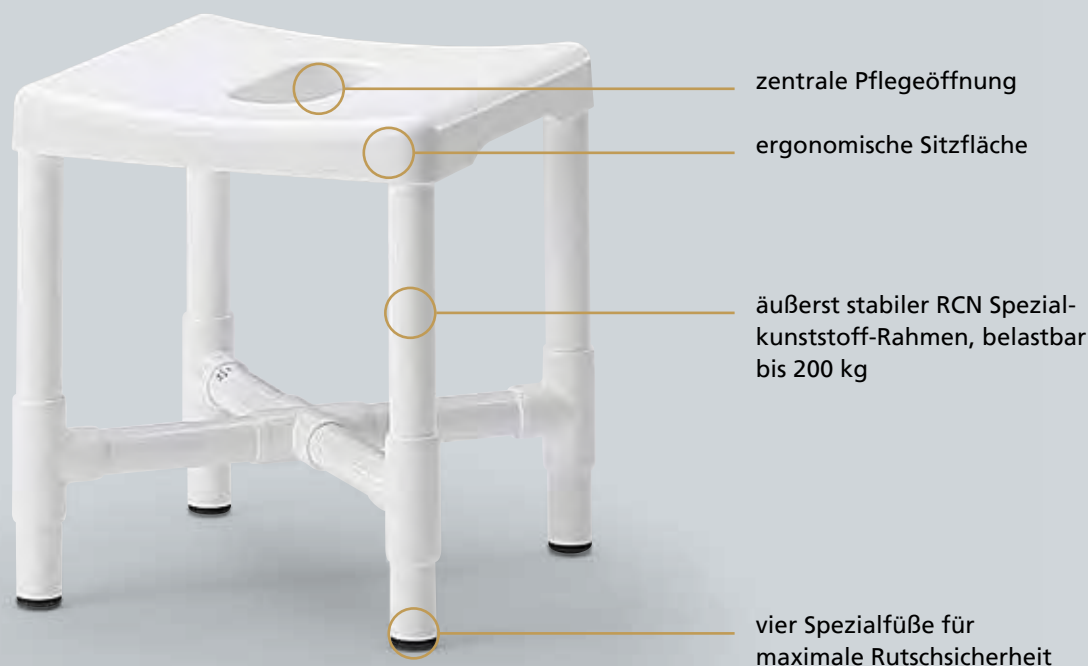

Praktische Ausstattungsoptionen:



A
Armlehnen



RL
Rückenlehne,
Polster in 3
Farben erhältlich



PRS
Polsterrücken,
in Blau erhältlich



HV
Höhenverstellung,
7 Höhen
einstellbar



DLR
Ø 75 mm Kunst-
stoff-Edelstahl-
Doppelradrollen,
mit Feststeller



PA
Polsterauflage,
in 3 Farben
erhältlich

Der DH 49 und seine Varianten



DH 49 A PA



DH 49 HV



DH 49 A



DH 49 A RL



DH 49 A RL PA



DH 49 PRS



DH 49 A PRS



DH 49 PRS PA

Alle Modelle auf dieser Seite sind bis 150 kg belastbar und garantiert nicht rostend! Die Sitzhöhe kann auf Wunsch ohne Mehrpreis angepasst werden.

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 49	420	420	480	420	420	470	200	3,4
DH 49 A	420	530	635	420	420	470	150	5,5
DH 49 HV	420	420	415-565	420	420	400-550	150	5,0
DH 49 A RL	480	530	750	420	420	470	150	6,6
DH 49 PRS	550	430	790	420	420	470	150	6,9
DH 49 A PRS	530	540	925	420	420	470	150	9,6

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!
Alle Angaben in mm bzw. kg.

Farben PUR-Schaum für Polsterauflage und Rückenlehne



graphit



blau



kobalt

Duschhocker

Unsere Duschhocker-Modellreihe mit noch mehr Sitzkomfort! Die Basis bildet das Grundmodell DH 80 mit Armlehnen, der DH 90 hat zusätzlich eine Rückenlehne und der DH 100 hat zusätzlich Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen.

Wie bei RCN üblich, sind auch diese Produkte aus einem hoch stabilen RCN Spezialkunststoff-Rahmen (5 Jahre Garantie) mit einer Belastbarkeit von 150 kg gefertigt.

Viele weitere Optionen ermöglichen Ihnen, die Hocker ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammenzustellen.

DH 80 – Grundmodell



Praktische Ausstattungsoptionen:



PP
Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum, abnehmbar



PPE
Einleger für Sitz, zum Verschließen der Toiletten- und Pflegeöffnung



BS
ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung



Rückenlehne
bei DH 90 und DH 100



HV
Höhenverstellung, 7 Höhen einstellbar



Rollen
Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, mit Feststeller bei DH 100

Varianten des DH 80, DH 90 und DH 100



DH 80



DH 80 HV



DH 80 PP



DH 80 BS



DH 90



DH 90 PP



DH 90 PP PPE



DH 100



DH 100 PP

Alle Modelle auf dieser Seite sind bis 150 kg belastbar und garantiert nicht rostend! Die Sitzhöhe kann auf Wunsch ohne Mehrpreis angepasst werden.

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 80	510	540	685	510	440	510	150	7,1
DH 80 HV	510	545	675-825	510	440	500-650	150	7,9
DH 80 PP	520	540	685	520	440	530	150	8,3
DH 80 BS	555	540	685	555	440	510	150	7,0
DH 90	545	540	795	500	440	510	150	7,6
DH 90 PP PPE	545	540	795	500	440	530	150	10,5
DH 100 PP	545	545	815	500	440	550	150	10,1

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Farben PUR-Schaum für Polstersitz und Einleger



graphit



blau



kobalt

Farben Monoblock für Sitz



graphit



rot



kobalt

Duschhocker

DWH 90

Der besondere Duschwannen-Eckhocker!

Ohne Montage – einfach hinstellen, an zwei stabilen Wänden anlehnen und fertig!


Dieser äußerst stabile und standsichere Duschhocker mit Höhenverstellung kommt insbesondere in der Duschwanne zum Einsatz. Durch die Stellung der hinteren Standfüße ermöglicht er in der Duschwanne eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Platzes und bietet eine gute Beinfreiheit.

- breiter Vollkunststoffsitz mit Pflegeöffnung
- mit Höhenverstellung
- stabiler Stand durch vier rutschfeste Füße, zwei davon mit zusätzlicher Saugfunktion
- ohne Montage, muss nur an zwei feste Wände angelehnt werden
- passt auch ideal in herkömmliche Duschwannen
- sorgt für optimale Raumnutzung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 120 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



● Hilfsmittelnummer: 04.40.03.1030




Über 30 cm mehr Platz! im Vergleich zu normalen Hockern mit Sitzfläche 40 x 40 cm

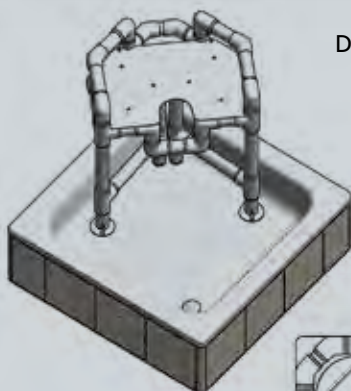

DWH 90

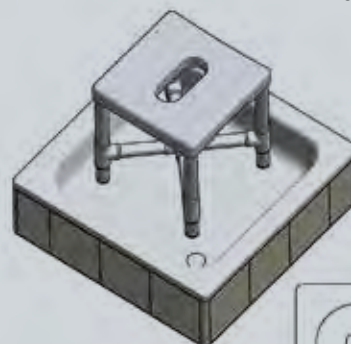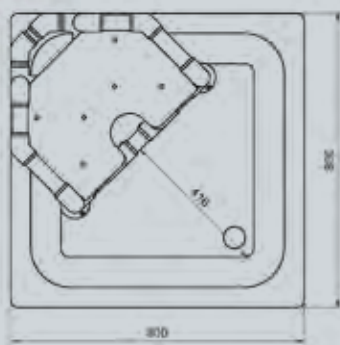

Normaler Hocker

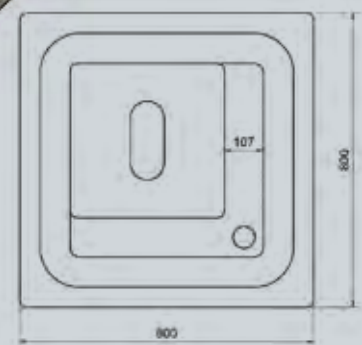



DT 100 HV

Toilettensitzerhöhung, Aufstehhilfe und Duschhocker. Ohne Montage.

- Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Armlehnen
- mit Höhenverstellung **HV**,
7 Höhen einstellbar in 25-mm-Schritten
- mit Spritzschutz (einfach über Toilette stellbar)
- Spezialfüße für maximale Rutsicherheit
- Spezialkunststoff-Rahmen, belastbar bis 150 kg



DT 100 HM SP

Die Kompaktlösung: Toilettensitzerhöhung, Aufstehhilfe, Duschhocker und Nachtstuhl.

Wie DT 100 HV, zusätzlich mit:

- Toilettentopf
- Sitzpolster **SP**
- belastbar bis 150 kg



SDH 70

Der Stehhocker – das ideale Hilfsmittel für Menschen mit Problemen beim Aufstehen oder Hinsetzen.

- Spezialfüße für maximale Rutsicherheit
- Polstersitz und Polsterrücken aus PUR-Schaum in der Farbe Blau
- belastbar bis 120 kg

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DWH 90	470	610	650-750	345	480	460-560	120	8,0
DT 100 HV	510	545	675-825	500	440	500-650	150	7,6
DT 100 HM SP	510	545	675-825	500	440	500-650	150	8,8
SDH 70	510	450	910	200	390	650	120	8,4

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitzpolster



gelb



rot



blau



grün



anthrazit

Erleben Sie einmalige Wohlfühl-Momente mit den RCN Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühlen.



Wohlfühl-Merkmale für

Pflegende:

- praxisorientiert und -erprobt
- einfache Handhabung und Bedienung
- leichte Beweglichkeit durch geringes Eigengewicht
- sehr gute Wendigkeit des Stuhles bei gleichzeitig hoher Standsicherheit
- rückenschonendes und sicheres Umsetzen der Pflegebedürftigen
- optimaler Zugang zu allen Körperpartien und einfache Pflege des Intimbereiches
- wartungsfreundlich und leicht zu reinigen
- langlebig und TÜV-geprüft

Pflegebedürftige:

- hautfreundliches und besonders komfortables Polstermaterial
- Spezialkunststoff passt sich schnell der Körpertemperatur an
- Konstruktion und Ausstattung sorgen für spürbare Sicherheit
- individuelle Sitzhaltung und dauerhaft bequemes Sitzen
- hohe Belastbarkeit
- freundliche Polsterfarben
- Ausstattung nach individuellen Bedürfnissen durch große Auswahl an Optionen

Unsere multifunktionalen Dusch- und Toilettenstühle sind alle toilettenüberfahrbar. Die Sitzhöhe und überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.



AWT:

Abstand zwischen Wand und Toilettenöffnung.

Bitte prüfen Sie vor Ort den vorhandenen Abstand von Wand zur Toilettenöffnung und gleichen Sie diesen mit dem AWT-Wert Ihres Wunschmodelles ab.

Viele Wege führen zum Ziel!

Mit dem robusten Dusch-Toilettenstuhl von RCN führt Sie ein einziges Produkt auf kürzestem Wege durch Ihren professionellen Pflegealltag. Entdecken Sie die sinnvolle **ALL-IN-ONE**-Lösung für Ihre tägliche Pflegeroutine!

Der multifunktionale Dusch-Toilettenstuhl von RCN vereint Transportstuhl, Toiletten- und Duschstuhl in einem Produkt und erspart unnötige Umsetz- und Transfervor-

gänge. Die Vielseitigkeit unseres Pflegestuhles hilft Ihnen, das optimale Maß zwischen eingesetzten Mitteln und pflegerischer Notwendigkeit zu wahren! Sie sparen unnötige Hilfsmittel, wertvolle Zeit, vor allem aber schonen Sie wichtige körperliche und mentale Ressourcen der Pflegekräfte und Pflegebedürftigen.

Ein Gewinn für alle!

Pflege geht auch anders – mit RCN

Der RCN Weg: drei Aufgaben, ein Produkt und zwei Umsetzvorgänge

RCN Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl



Bett

Transfer

Toilette

Dusche

Transfer

Ruhesessel



Der Umweg: drei Aufgaben, drei Produkte und fünf Umsetzvorgänge

Unser kostengünstiger Duschstuhl SC 15 Basic ist ein hervorragendes Basismodell, das Ihnen die Möglichkeit bietet, durch praktische Optionen es an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.

- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 130 kg
- garantiert nicht rostend
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie

SC 15 Basic



Der Multifunktions-Dusch- und Toilettensstuhl SCC 15 ASA FT

SCC 15 ASA FT

wie der SC 15 Basic, zusätzlich mit:

- Toilettentopfhalterung und Toilettentopf mit Skalierung
- **ASA** schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch auch links oder beidseitig: **2 ASA**
- **FT** ausziehbare und kippsichere Fußstütze



Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe in der Farbe Blau

Armlehnen mit Softgrip-Ummantelung in der Farbe Blau

Ausstattungsoptionen für SC 15 Basic

Vollkunststoffbrille mit Hygieneöffnung

Rahmen aus griff- und berührungsfreundlichem RCN Spezialkunststoff

toilettenüberfahrbar

Ø 75 mm Kunststoff-Doppelradrollen mit Feststeller. Gute Wendigkeit, rasche und sichere Arretierung des Stuhls



ASA schwenkbare Armlehne rechts



SG Sicherheits-Beckengurt, stufenlos verstellbar



Toilettentopf mit Skalierung



FT ausziehbare und kippsichere Fußstütze

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belast-barkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SC 15 Basic	580	540	1005	445	440	505	505	440	130	8,5
SCC 15 ASA FT	605	540	1005	430	440	530	410	470	130	12,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Dusch- und Toilettenstühle

Die Dusch- und Toilettenstühle der SCC 200 Reihe sind die Einstiegsmodelle in die Welt der langlebigen, qualitativ hochwertigen und funktionalen Dusch- und Toilettenstühle von RCN.

Kennzeichnend für die SCC 200 Reihe ist die ergonomisch geformte Monoblock-Rückenlehne aus RCN Spezialkunststoff.

SCC 200 S



Die SCC 200 Reihe


Die Stühle dieser Reihe können mit der Toilettenbrille, dem Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung oder den Sitzen aus PUR-Schaum ausgestattet werden. Selbstverständlich können

Sie sich Ihren SCC 200 genau nach Ihren Wünschen zusammenstellen und auf die Bedürfnisse der Nutzer optimal abstimmen.


integrierte Schiebegriffe

Monoblock-Rückenlehne in 3 Farben erhältlich:


hoher Komfort durch luftdurchlässige Öffnungen

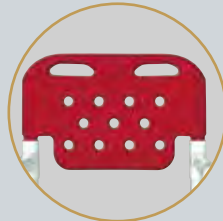

rot

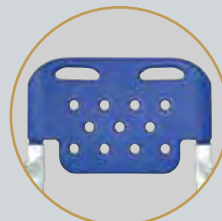

kobalt

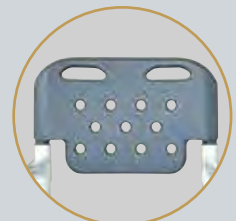

graphit

KA abklappbare Armlehne

SB Sicherheitsbügel

Rahmen aus RCN Spezialkunststoff



KA



SB

BS ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung



Polstersitz aus
PUR-Schaum mit
Toilettenöffnung
PS



Polstersitz aus
PUR-Schaum mit
Toiletten- und
Pflegeöffnung **PP**

Alternativen:

hochklapp- und
abnehmbare
Vollkunststoffbrille

Toilettentopf aus temperaturstabilem Kunststoff mit Skalierung, nach hinten ausziehbar, auf Wunsch mit Henkel

toilettenüberfahrbar



4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen

FT ausziehbare und kippsichere Fußstütze, einfach am Fußrahmen vor- und zurückgleitend



Dusch- und Toilettenstühle



SCC 200 Grundmodell

- Monoblock-Rückenlehne
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Toilettentopf mit Skalierung und Toilettentopfhalterung



SC 200

- Duschstuhl wie SCC 200, jedoch
- ohne Toilettentopf und -halterung



SCC 200 BS

- Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 200 mit
- Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung **BS**



SCC 200 BS FT

- Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 200 BS mit
- ausziehbarer und kippsicherer Fußstütze **FT**

Alle Modelle sind auch ohne Toilettentopf und Toilettentopfhalterung erhältlich unter der Bezeichnung SC 200!

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 200	560	555	990	475	440	500	500	420	150	9,9
SCC 200 FT	560	555	1020	475	440	530	410	450	150	12,0
SCC 200 BS	565	555	990	490	440	505	505	390	150	11,0
SCC 200 BS FT	565	555	1020	490	440	535	415	420	150	12,0
SCC 200 S	565	555	1080	490	440	535	415	420	150	12,5

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

SCC 200 Modellvarianten



SCC 200 BS FT SB

Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 200 BS FT mit
 ● Sicherheitsbügel SB



SCC 200 S

wie SCC 200 BS FT SB mit
 ● abklappbarer Armlehne KA



SCC 200 FT PS

Dusch- und Toilettenstuhl

- ausziehbare und kippsichere Fußstütze FT
- Polstersitz mit Toilettenöffnung aus PUR-Schaum PS (optional Einleger für Polstersitz PSE)



SCC 200 FT PP PPE

Dusch- und Toilettenstuhl

- ausziehbare und kippsichere Fußstütze FT
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum PP
- Einleger für Polstersitz PPE

Alle Modelle sind garantiert nicht rostend, toilettenüberfahrbar und bis 150 kg belastbar!


Die Sitzhöhe oder überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.

Farben Monoblock für Rückenlehne und Sitz



graphit rot kobalt

Farben PUR-Schaum für Polstersitz

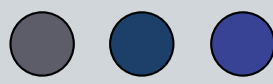

graphit blau kobalt

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle

SCC 250 D SB mit Sitz- und Rückenpolster ist optimal auch als Zimmerstuhl zu verwenden. Wählen Sie die für Sie passenden Optionen und Polsterfarben aus. Nachstehend erhalten Sie einen Überblick über die Ausstattungsoptionen.

Kostenlose werkseitige Anpassung der überfahrbaren Höhe an die vorhandene Toilettenbeckenhöhe!

SCC 250 D SB



Rahmen aus griff- und berührungsfreundlichem RCN Spezialkunststoff

RP Rückenpolster mit Schaumstoffkern, Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe

ASA schwenkbare Armlehne rechts für leichten Transfer, durch Drehclip gesichert. Auf Wunsch auch links oder beidseitig: **2ASA**

SB Sicherheitsbügel

SP Sitzpolster mit Schaumstoffkern, Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe

Toilettenopf aus temperaturstabilem Kunststoff mit Skalierung, seitlich ausziehbar, auf Wunsch mit Henkel

toilettenüberfahrbar, kostenlose Anpassung der überfahrbaren Höhe

Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller. Gute Wendigkeit auf engstem Raum, rasche und sichere Arretierung des Stuhls

FT ausziehbare und kippsichere Fußstütze, einfach am Fußrahmen vor- und zurückgleitend



Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe



Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe bei Modellen mit SB



Rückseitige Topfdeckelhalterung



ASA



SB



hochklapp- und abnehmbare Vollkunststoffbrille



abnehmbare Sitzpolster



abnehmbare Rückenpolster



Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle

Die Stühle der SCC 250 Reihe mit den PUR-Polstervarianten – die beste Lösung für den Pflegealltag in den Funktionsbereichen Dusche, Toilette und ggf. Transport. Wählen Sie die für Sie passenden Optionen und Polsterfarben.

Kostenlose werkseitige Anpassung der überfahrbaren Höhe an die vorhandene Toilettenbeckenhöhe!

SCC 250 PPG SB



Rahmen aus griff- und berührungsfreundlichem RCN Spezialkunststoff

PR Polsterrücken aus PUR-Schaum, einfach abnehmbar für leichte Reinigung



Rückseitige
Topfdeckelhalterung

ASA schwenkbare Armlehne rechts für leichten Transfer, durch Drehclip gesichert.
Auf Wunsch auch links oder beidseitig: **2ASA**

SB Sicherheitsbügel



2ASA



SB

PP Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum, bietet hohen Sitzkomfort und leichtere Zugänglichkeit zu den Intimzonen



Polstersitz aus PUR-Schaum mit
Toiletten- und Pflegeöffnung **PP**,
optional mit Einleger **PPE**

Toilettentopf aus temperaturstabilem Kunststoff mit Skalierung, seitlich ausziehbar, auf Wunsch mit Henkel

toilettenüberfahrbar, kostenlose Anpassung der überfahrbaren Höhe



4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen

FT ausziehbare und kippsichere Fußstütze, einfach am Fußrahmen vor- und zurückgleitend




Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle


Bei RCN können Sie den Multifunktionsstuhl so zusammenstellen, dass er Ihren Erwartungen entspricht.




SP Sitzplatte mit Polster, Bezüge aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe

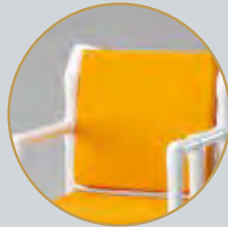

RP Rückenpolster, einfache Druckknopfbefestigung, Bezüge wie bei Sitzpolster

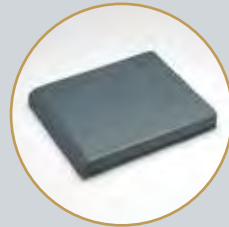

PUS Polstersitz geschlossen aus PUR-Schaum

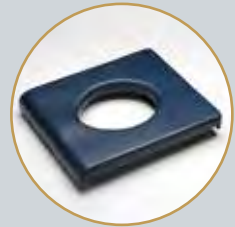

PS Polstersitz mit Toilettenöffnung aus PUR-Schaum

Polster müssen zum Duschen abgenommen werden!




PSE Einleger für Polstersitz PS



PP Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum



PPE Einleger für Polstersitz PP

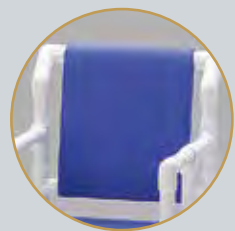

PR Polsterrücken aus PUR-Schaum



PZ Polstersitz zweiteilig aus PUR-Schaum



DRS Durchrutschschutz



ASA schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch auch links oder beidseitig: **2 ASA**



AP Armpolster-Set aus PUR-Schaum

Farben Sunsüre-Gewebe für Rückenbespannungen von Dusch- und Toilettenstühlen



weiß



dunkel-blau



blau



tauben-blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Ausstattungsoptionen für SC 100 und SCC 250



SB Sicherheitsbügel




SG Sicherheits-Beckengurt, stufenlos verstellbar, einfach am Stuhlrahmen zu befestigen




GR Schiebegriff



KS Kopfstütze, verstellbar

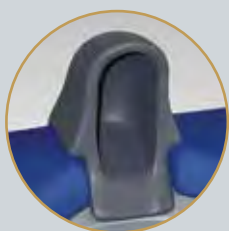

UR Spritzschutz aus leicht zu reinigendem PUR, passt in Pflegeöffnung aller PP-Sitze

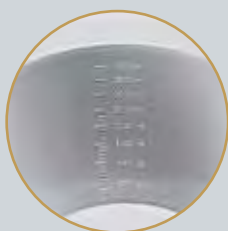

TK Zweit-Toilettenopf mit Skalierung, optional mit Henkel



FT ausziehbare und kipp-sichere Fußstütze



MFT mitlaufende Fußstütze zum Nachrüsten aller Stuhlmodelle



NH Sitzneigung nach hinten 30 mm



AKA Anti-Kipp-Vorbau, zusätzlicher Schutzrahmen für besonders unruhige Patienten



HV Höhenverstellung 4-fach, zur Anpassung der Sitzhöhe und der überfahrbaren Höhe (ohne ASA 6-fach!)



ER Ø 100 mm Einradrolle aus Kunststoff/Edelstahl, feststellbar

Farben PUR-Schaum für Polstersitz und Polsterrücken



graphit



blau



kobalt

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster



gelb



rot



blau



grün



anthrazit

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle



SCC 250

Grundmodell mit

- ergonomisch geformter Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar

SC 100

Duschstuhl wie SCC 250, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



SCC 250 HV SB

Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 250 mit

- 6-facher (4-fach bei ASA) Höhenverstellung HV
- Sicherheitsbügel SB

SC 100 HV SB

Duschstuhl wie SCC 250 HV SB, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



SCC 250 FT SB

Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 250 mit

- ausziehbarer und kippsicherer Fußstütze FT
- Sicherheitsbügel SB

SC 100 FT SB

Duschstuhl wie SCC 250 FT SB, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



Höhenverstellung HV



rückseitige Topfdeckelhalterung



hochklapp- und abnehmbare Brille

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	AWT	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe					
SCC 250	600	555	995	460	440	500	500	420	245	150	9,7
SCC 250 HV SB	605	555	915-1065	460	440	400-550	400-550	320-470	245	150	11,0
SCC 250 FT SB	605	555	1040	460	440	530	410	450	245	150	11,0
SC 100 PUS	605	555	1010	460	440	525	525	–	–	150	11,0
SCC 250 FT PR	590	555	1050	450	440	530	410	450	225	150	15,0
SCC 250 D SB	605	555	1040	460*	440	530**	410	450	245	150	16,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

* Sitztiefe ohne Rückenpolster, Polsterdicke 50 mm (unbelastet)

** Sitzhöhe ohne Sitzpolster, Polsterdicke 60 mm (unbelastet)

Modellvarianten



SC 100 PUS

Duschstuhl mit

- abnehmbarem, geschlossenem Polstersitz aus PUR-Schaum **PUS**
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe



SCC 250 FT PR

Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 250 mit

- ausziehbarer und kippsicherer Fußstütze **FT**
- Polsterrücken **PR**

Polsterrücken zur leichteren Reinigung abnehmbar.

SC 100 FT PR

Duschstuhl wie SCC 250 FT PR, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



SCC 250 D SB

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 250 mit

- schwenkbarer Armlehne **ASA** (optional beidseitig **2ASA**)
- ausziehbarer und kippsicherer Fußstütze **FT**
- Rückenpolster mit Schaumstoffkern **RP**
- Sitzpolster mit Schaumstoffkern **SP**
- Sicherheitsbügel **SB**

SC 100 D SB

Duschstuhl wie SCC 250 D SB, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung

Alle Modelle sind garantiert nicht rostend, toilettenüberfahrbar und bis 150 kg belastbar!

Die Sitzhöhe oder überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.

Farben Sunsure-Gewebe für Rückenbespannungen von Dusch- und Toilettenstühlen



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Farben PUR-Schaum für Polstersitz und Polsterrücken



graphit



blau



kobalt

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster



gelb



rot



blau



grün



anthrazit

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle



SC 100 PR PUS

Duschstuhl

- Polstersitz geschlossen aus PUR-Schaum **PUS**
- abnehmbarer Polsterrücken **PR** aus PUR-Schaum
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller

Alle Modelle sind garantiert nicht rostend, toilettenüberfahrbar und bis 150 kg belastbar!

Die Sitzhöhe und überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.



SCC 250 PSG SB

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

- Polstersitz mit Toilettenöffnung aus PUR-Schaum **PS**
- abnehmbarer Polsterrücken **PR** aus PUR-Schaum
- ausziehbare Fußstütze **FT**
- schwenkbare Armlehne **ASA** (optional beidseitig **2 ASA**)
- Sicherheitsbügel **SB**
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar

SC 100 PSG SB

Duschstuhl wie SCC 250 PSG SB, jedoch ohne

- Toilettentopf und -halterung



Sicherheitsbügel



rückseitige Topfdeckelhalterung



SCC 250 PZG SB

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 250 PSG SB, jedoch mit besonderem PZ-Sitz; zwei verschiebbare Halbschalen bieten eine durchgehend zugängliche Pflegeöffnung für eine optimale Intimpflege.

- geteilter Polstersitz **PZ**

SC 100 PZG SB

wie SCC 250 PZG SB, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



geteilter Polstersitz **PZ**

Farben Sunsüre-Gewebe

für Rückenbespannungen von Dusch- und Toilettenstühlen



weiß



dunkelblau



blau



taubenblau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Farben PUR-Schaum

für Polstersitz und Polsterrücken



graphit



blau



kobalt

Modellvarianten



SCC 250 PP SB

Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 250, jedoch

- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum **PP**
- Sicherheitsbügel **SB**

SC 100 PP SB

wie SCC 250 PP SB, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



rückseitige Topfdeckelhalterung



SCC 250 PP FT

Dusch- und Toilettenstuhl wie SCC 250, jedoch

- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum **PP**
- ausziehbare und kippbare Fußstütze **FT**

SC 100 PP FT

wie SCC 250 PP FT, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



SCC 250 PPG SB AP ER

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum **PP**
- abnehmbarer Polsterrücken **PR** aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kippbare Fußstütze **FT**
- schwenkbare Armlehne **ASA** (optional beidseitig **2ASA**)
- Sicherheitsbügel **SB**
- Armpolster **AP**
- Ø 100 mm Einradrollen aus Kunststoff/Edelstahl, feststellbar **ER**
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar

SC 100 PPG SB AP ER

wie SCC 250 PPG SB AP ER, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	AWT	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe					
SC 100 PR PUS	590	555	1020	460	440	525	525	–	–	150	14,0
SCC 250 PSG SB	590	555	1050	450	440	555	435	455	205	150	18,0
SCC 250 PZG SB	590	555	1050	450	440	555	435	455	205	150	17,0
SCC 250 PP SB	605	555	1010	460	440	525	525	425	225	150	13,5
SCC 250 PP FT	605	555	1040	460	440	555	435	455	225	150	15,0
SCC 250 PPG SB AP ER	590	555	1065	450	430	565	405	465	205	150	21,5

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle



SCC 250 PPG SB

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung **PP**
- abnehmbarer Polsterrücken **PR**
- Toilettentopf mit Skalierung
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze **FT**
- schwenkbare Armlehne **ASA** (optional beidseitig **2 ASA**)
- Sicherheitsbügel **SB**
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller



SC 100 PPG SB

wie SCC 250 PPG SB, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung



SCC 250 PPG SB 2 ASA

wie SCC 250 PPG SB, jedoch

- 2 ausschwenkbare Armlehnen **2 ASA**



SC 100 PPG SB 2 ASA

wie SCC 250 PPG SB 2 ASA, jedoch

- ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unter-schenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	AWT	Belast-barkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe					
SCC 250 PPG SB	585	555	1050	450	440	555	435	455	205	150	17,8
SCC 250 PPG SB 2ASA	590	555	1050	450	440	555	435	455	205	150	20,0
SCC 250 PPG SB HV	585	555	970-1070	450	440	480-580	360-460	380-480	205	150	18,4
SCC 250 PPG SB DRS	590	555	1050	450	440	555	435	455	205	150	20,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Modellvarianten



SCC 250 PPG SB HV
Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl
wie SCC 250 PPG SB mit
● Höhenverstellung, 5 Höhen einstellbar
in 25-mm-Schritten **HV**



SC 100 PPG SB HV PPE
wie SCC 250 PPG SB HV, jedoch
● ohne Toilettentopf und Toilettentopfhalterung
● mit Einleger für Polstersitz **PPE**



SCC 250 PPG SB DRS
Der besondere Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl SCC 250 PPG SB mit dem 100%igen Durchrutschschutz **DRS**. Der abnehmbare und gepolsterte Durchrutschschutz verhindert ein Herausrutschen des Nutzers und ersetzt einen Beckengurt. Der Durchrutschschutz kann ganz leicht abgenommen werden, sofern er nicht benötigt wird. Abb. links mit Polstersitzeinleger **PPE**. Modell **SC 100 PPG SB DRS** ohne Toilettentopf und ohne Toilettentopfhalterung.

Alle Modelle sind garantiert nicht rostend, toilettenüberfahrbar und bis 150 kg belastbar!
Die Sitzhöhe und überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.

Farben PUR-Schaum
für Polstersitz und Polsterrücken



graphit



blau



kobalt

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle

Der RCN Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl für Pflegebedürftige mit stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Die jeweils 6-fach verstellbare Rückenlehne und Beinstütze gewährleisten eine optimale Positionierung des Patienten.



SCC 250 RC

- verstellbare Beinstütze (6 Positionen einstellbar) mit wasserdicht verschweißtem Polster
- verstellbare Rückenlehne (7 Positionen einstellbar)
- abklappbare Armlehne rechts
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum, nur in Blau erhältlich
- Polsterrücken aus PUR-Schaum
- Toilettentopf mit Skalierung
- 5 Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie



SCC 250 OTP SB

Orthopädie-Dusch- und Toilettenstuhl

- mögliche Neigungswinkel der Rückenlehne: ca. 100° bis 120° (bei waagerechter Sitzfläche)
- mögliche Neigungswinkel der Sitzfläche: ca. -3° bis +3°
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- Einleger zum Verschließen der Toiletten- und Pflegeöffnung
- zweigeteilter Polsterrücken aus PUR-Schaum in Blau
- Sicherheitsbügel
- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Toilettentopf mit Skalierung



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
SCC 250 RC	1000	555	1380	430	440	595	150	33,0
SCC 250 OTP SB	630	555	1040	450	440	555	150	23,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Multifunktions-Dusch- und Toilettenrollstuhl

DR 250 PPG, der Duschrollstuhl für Selbstfahrer mit 24"-Greifreifen, Sitzbreite 44 cm und belastbar bis 150 kg, ist das ideale Hilfsmittel für mehr Selbstständigkeit im Alltag. Er ist toilettenüberfahrbar und dank der integrierten Pflegeöffnung der optimale Begleiter

unter der Dusche. Alle Materialien sind absolut nicht rostend. Der DR 250 PPG hat einen komfortablen Polsterrücken und Polstersitz mit Pflegeöffnung aus PUR-Schaum.



DR 250 PPG

- 24"-Greifreifen mit Feststellbremsen
- beidseitig schwenkbare Armlehne 2 ASA
- ausziehbare Fußstütze FT
- Polsterrücken und Polstersitz mit Pflegeöffnung aus PUR-Schaum PR, PP
- toilettenüberfahrbar
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- garantiert nicht rostend

DR 100 PPG (ohne Abbildung)

Dusch- und Toilettenrollstuhl wie DR 250 PPG, jedoch ohne Toilettentopf und -halterung



beidseitig schwenkbare Armlehne



ausziehbare Fußstütze



Polstersitzeinleger PPE, optional



2 Feststellbremsen optional

Farben PUR-Schaum für Polstersitz und Polsterrücken sowie Armpolster bei DR 200 S



graphit

blau

kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	AWT	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe					
DR 250 PPG	800	725	1010	450	440	565	400	430	405	150	29,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Dusch- und Toilettenrollstuhl

DR 200 S, der Duschrollstuhl für Selbstfahrer mit 24"-Greifreifen, Sitzbreite 44 cm und belastbar bis 150 kg, ist das ideale Hilfsmittel für mehr Selbstständigkeit im Alltag. Er ist toilettenüberfahrbar und dank der integrierten Pflegeöffnung der optimale Begleiter unter der Dusche.

Alle Materialien sind absolut nicht rostend. Der DR 200 S hat eine ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen.

DR 200 S

- 24"-Greifreifen mit Feststellbremsen
- beidseitig schwenkbare Armlehne mit Armpolster aus PUR-Schaum
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Armpolster siehe Farben PUR-Schaum

Farben Monoblock für Rückenlehne und Sitz



graphit rot kobalt



beidseitig schwenkbare Armlehne



3 Farben können miteinander kombiniert werden

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	AWT	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe					
DR 200 S	790	720	1070	450	440	550	370	425	375	150	22,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Transportrollstuhl

DR 400, der robuste Transportstuhl, der auch für Selbstfahrer einsetzbar ist, hat eine Sitzbreite von 44 cm und ist bis 150 kg belastbar.



DR 400

- 24"-Antriebsräder mit Greifring
- beidseitig schwenkbare Armlehne mit Armpolster aus PUR-Schaum 2 ASA
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern
- Polsterbezüge aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- ausziehbare Fußstütze FT
- 2 Feststellbremsen
- Schiebegriff
- abgewinkelte Armlehnen
- Kleiderschutz beidseitig
- auch für Selbstfahrer einsetzbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Kleiderschutz beidseitig

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster



gelb



rot



blau



grün



anthrazit

Farben PUR-Schaum für Armpolster



graphit



blau



kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
DR 400	800	725	1055	400	440	555	350	150	29,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl

Der SCC 250 Comfort G – unser Multitalent!

Vielseitig einsetzbar als Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl, ist er für besonders bewegungseingeschränkte Menschen das ideale Hilfsmittel. Pflegebedürftige, die nicht mehr aufrecht sitzen oder ihr Gewicht nicht mehr tragen können, empfinden die rückwärts geneigte Sitzposition als sehr entspannend und beruhigend.

Sanfte Bewegungsabläufe bei der Verstellung des Neigungswinkels der Sitzposition.

Der SCC 250 Comfort G bietet durch seinen äußerst stabilen Edelstahlrahmen ein hohes Maß an Sicherheit.



SCC 250 Comfort G

Die einfache Bedienung der Gasdruckfeder ermöglicht der Pflegekraft, beruhigend auf den Pflegebedürftigen einzuwirken. Die Gasdruckfeder ist äußerst wartungsarm und immer sofort einsatzbereit.

Fußstützen, Armlehnen, Kopfstütze, Toilettentopf-
einrichtung und die komfortablen PUR-Weichschaum-
polster unterstützen die Multifunktionalität dieses
besonderen Stuhls.

Garantiert nicht rostend und belastbar bis 150 kg!

dreidimensional verstellbare Kopfstütze



Schiebegriff

Polsterrücken aus PUR-Schaum

hochklappbare Armlehnen mit Armpolster aus PUR-Schaum



gewichtsoptimierter, kippsicherer Edelstahlrahmen

Polstersitz mit Hygieneeingriff aus PUR-Schaum.
Einleger für Polstersitz **PSE, optional**

Toilettentopf aus temperaturstabilem Kunststoff mit Skalierung



zwei Gasdruckfedern aus Edelstahl garantieren Langlebigkeit
und eine komfortable Verstellung des Neigungswinkels

einzelnen höhenverstellbare, hochklappbare, abnehmbare Fußstützen



Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller


Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl

SCC 250 Comfort G



Der Neigungswinkel ist stufenlos verstellbar.

- sehr sanfte Bewegungsabläufe per Gasdruckfeder
- Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Polstersitz mit Toilettenöffnung und Hygieneeingriff aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- hochklappbare Armlehnen mit Armpolstern aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- Polsterrücken aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- dreidimensional verstellbare Kopfstütze
- einzeln höhenverstellbare, hochklappbare, abnehmbare Fußstützen
- Toilettentopf mit Skalierung
- 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- gewichtsoptimierter, kippsicherer Edelstahlrahmen
- garantiert nicht rostend
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg

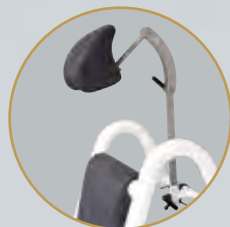

dreidimensional verstellbare Kopfstütze



rückseitige
Topfdeckelhalterung



PSE, Einleger für
Polstersitz, optional



einzeln höhenverstellbare, hochklappbare,
abnehmbare Fußstützen

Warum sich für einen SCC 250 Comfort G entscheiden?

Wir nennen Ihnen
überzeugende Gründe dafür:



1.

Multifunktionalität

Sie können den SCC 250 Comfort G als Duschstuhl, Toilettenstuhl, Transportstuhl oder Pflegestuhl nutzen.

2.

Platzsparende Alternative

Im Vergleich zu einer großen Duschliege ist der SCC 250 Comfort G ein platzsparendes Pflegehilfsmittel für kleine Pflegebäder.

3.

Absolut nicht rostend

Alle Materialien sind nicht rostend. Besonders robust ist der pulverbeschichtete Edelstahlrahmen.

4.

Individuell anpassbar

Die Verstellung des Sitzneigungswinkels, die dreidimensional verstellbare Kopfstütze und die unabhängig voneinander einstellbaren Fußstützen gewähren eine optimale und individuelle Anpassung an den Nutzer.

5.

Komfortables Umsetzen

Die beidseitig hochklappbaren Armlehnen, die klappbaren und abnehmbaren Fußstützen und die Verstellung der Sitzposition ermöglichen ein komfortables und angenehmes Umsetzen.

6.

Wohlfühlgarantie

Der Polstersitz und der Polsterrücken, die Armlehnenpolster und die Kopfstütze bestehen aus PUR-Weichschaum und sorgen für ein besonders angenehmes Sitzgefühl, auch über einen längeren Zeitraum.

7.

Langlebigkeit


Der mit 150 kg belastbare Edelstahlrahmen garantiert eine lange, nachhaltige und ressourcenschonende Nutzung. Die Garantie auf den Edelstahlrahmen beträgt 5 Jahre!

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel- länge	Breite zwischen Armlehnen	Belast- barkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 250 Comfort G	1050	655	1380	470	440	550	380-490	525	150	38,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Das RCN Gel-Sitzkissen ist aus hochwertigem und außergewöhnlich elastischem Gel gefertigt. Die besondere Struktur des Materials sorgt für eine stets optimale Druckverteilung und passt sich nahtlos den

Bewegungen und der Körperform an. Das Gel ist temperaturstabil, heizt sich nicht auf und behält auch nach Jahren seine Form.

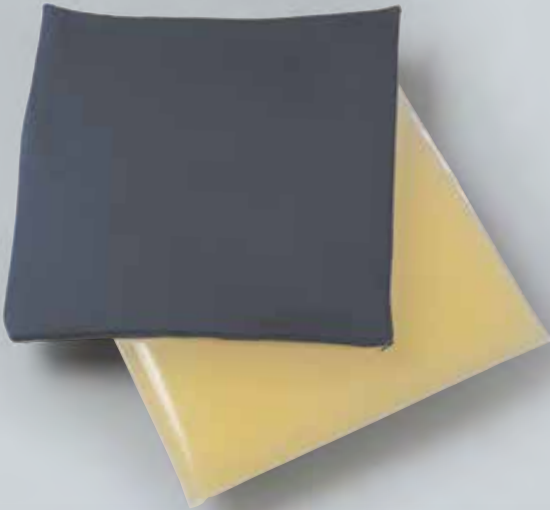


Modell GKG, geschlossen mit Bezug

- mit atmungsaktivem Bezug, waschbar bis 60 °C
- bewährte Dekubitus-Prophylaxe
- temperaturstabil und außergewöhnlich elastisch durch Elastan-Gel
- Material garantiert optimale Druckverteilung und passt sich nahtlos allen Bewegungen und jeder Körperform an
- garantiert auslaufsicher
- mit Antirutschbeschichtung auf der Unterseite des Bezugs
- einfache Reinigung mit Wasser oder Desinfektionsmittel
- bis 200 kg belastbar
- auf Anfrage auch in Sondergrößen erhältlich



Modell GKO, offen ohne Bezug

- bewährte Dekubitus-Prophylaxe
- eignet sich optimal als Dusch- und Toilettensitzauflage
- temperaturstabil und außergewöhnlich elastisch durch Elastan-Gel
- Material garantiert optimale Druckverteilung und passt sich nahtlos allen Bewegungen und jeder Körperform an
- garantiert auslaufsicher
- hautfreundlicher Folienbezug
- einfache Reinigung mit Wasser oder Desinfektionsmittel
- bis 200 kg belastbar
- 43 x 43 x 2,5 cm
- auf Anfrage auch in Sondergrößen erhältlich

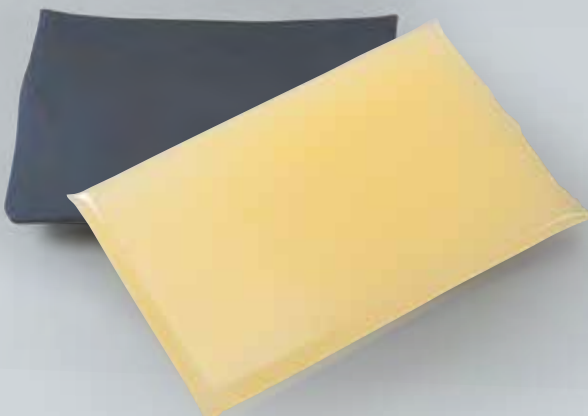

Modell GKGW, geschlossen mit Bezug für den Gehwagen 120

- wie GKG, nur in der Größe 43 x 30 x 2,5 cm

Optimaler Sitzkomfort und Dekubitus-Prephylaxe



Ihr Plus an Komfort:

- Optimale Druckverteilung: Passt sich perfekt den Bewegungen und der Körperform an
- Dekubitus-Prephylaxe: Verhindert Druckgeschwüre – ideal für langes Sitzen
- Temperaturstabil: Heizt sich nicht auf und bleibt formstabil, auch nach Jahren

Hautfreundlich und leicht zu reinigen:

- schonend zur Haut
- einfache Reinigung mit Wasser oder Desinfektionsmittel

Vielseitig einsetzbar:

- Sitzkissen für Rollstühle und Stühle
- ideal als Dusch- und Toilettensitzauflage
- rutschfest auf der Toilettenbrille

Robust und belastbar:

- geeignet auch für schwergewichtige Pflegebedürftige bis 200 kg
- Abmessungen: 43 x 43 x 2,5 cm
- garantiert auslaufsicher (schnittfestes Elastomer-Gel)

Spitzenqualität:

- innovatives Design: jetzt aus eigener Produktion – „Made in Germany“
- erleben Sie den Unterschied: hautfreundlich, belastbar, vielseitig



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
GKG	430	430	25	200	5,0
GKO	430	430	25	200	4,5
GKGW	430	300	25	200	3,4

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

RCN Produktlinie für Schwergewichtige



DH 55 DS

Duschhocker

- Spezialkunststoff-Rahmen
- Sitzfläche mit Wasserablauföffnungen
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- belastbar bis 300 kg



DH 56

Duschhocker

- Spezialkunststoff-Rahmen
- Sitzfläche mit Wasserablauföffnungen
- Pflegeöffnung
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- belastbar bis 300 kg



DT 300 OS DSP

Duschhocker, Nachstuhl, Toilettensitzerhöhung, Toilettensitzverstärkung – zum Schutz des an die Wand montierten WCs

- Spezialkunststoff-Rahmen-verstärkt
- Armlehnen
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- Sitzfläche mit Pflegeöffnung
- Toilettentopf mit Skalierung
- Spritzschutz
- belastbar bis 300 kg



DH 80 OS DSP

Duschhocker

- Spezialkunststoff-Rahmen-verstärkt
- Armlehnen
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- Sitzfläche mit Pflegeöffnung
- Sitzbreite: 56-60 cm
- belastbar bis 250 kg

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 55 DS	400	400	500	400	400	500	300	6,7
DH 56	450	450	510	445	440	510	300	6,7
DT300 OSDSP	500	800	685	500	700	515	300	16,4
DH 80 OS DSP	500	660-700	685	500	560-600	515	250	14,2

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die Sitzhöhe kann auf Wunsch ohne Mehrpreis angepasst werden!

SCC 220 MS

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit neuem Monoblock-Vollkunststoffsitz MS. Der 54 cm breite Sitz bietet dem Nutzer durch seine ergonomische Form einen optimalen

Sitzkomfort und die 10 cm breite Pflegeöffnung ermöglicht eine komfortable Reinigung der Intimzonen. Belastbar bis 175 kg.



integrierte Schiebegriffe

luftdurchlässige Öffnungen

neue Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne

Rahmen aus RCN Spezialkunststoff

neuer Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung, Sitzbreite 54 cm

Toilettentopf aus temperaturstabilem Kunststoff mit Skalierung, seitlich ausziehbar, optional mit Henkel

toilettenüberfahrbar

4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen

Nützliche Optionen:



MFTOS mitlaufende Fußstütze

SBOS Sicherheitsbügel

AP Armpolster-Set aus PUR-Schaum

Die Sitzhöhe oder überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 220 MS	575	650	1000	490	540	480	480	365	175	12,5

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Farben Monoblock für Rückenlehne und Sitz



graphit



rot



kobalt

RCN Produktlinie für Schwergewichtige

Die Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle von RCN sind als XXL-Modelle standardmäßig in zwei Belastbarkeitsstufen erhältlich. Die Stühle der XL-Reihe sind bis max. 200 kg belastbar und in Sitzbreiten von 46 bis 54 cm

erhältlich. Die OS-Reihe beinhaltet Stühle mit einer max. Belastbarkeit von 250 kg bei Sitzbreiten von 56 bis 60 cm. Stühle ab **250 kg bis 400 kg** fertigen wir im Sonderbau optimal auf den Nutzer abgestimmt.


SCC 250 OS PPG STE



- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- hoch stabil, bis 400 kg belastbar
- leicht zu reinigen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig

- standardmäßig toilettenüberfahrbar
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf den RCN Spezialkunststoff-Rahmen

PR Polsterrücken aus PUR-Schaum, einfach abnehmbar für leichte Reinigung; mit Halterung für Topfdeckel

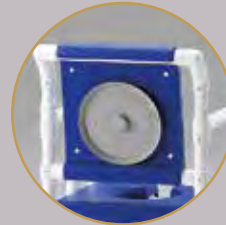

Rahmen aus griff- und berührungsfreundlichem Kunststoff


ASAOS verstärkte schwenkbare Armlehne



Polstersitz mit Pflegeöffnung aus PUR-Schaum, bietet hohen Sitzkomfort. Einleger **PPE**, optional
PPOS 44 cm breit
PPML 50 cm breit
PPXL 56 cm breit



Toilettentopf mit Skalierung, seitlich ausziehbar, optional mit Henkel

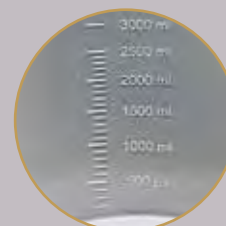

Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, feststellbar; sichere Arretierung des Stuhles und Wendigkeit auf engstem Raum



MFTOS ausziehbare, mitlaufende Fußstütze, trittstabil und voll belastbar

RCN Produktlinie für Schwergewichtige



SCC 250 OS DS

Grundmodell: Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung (optional auch mit Pflegeöffnung), 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe, Toilettentopf mit Skalierung, rückseitige Topfdeckelhalterung, toilettenüberfahrbar



SCC 250 OS DS ASAOS PR

- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung **DS**
- verstärkte, schwenkbare Armlehne **ASAOS**
- Polsterrücken abnehmbar aus PUR-Schaum (siehe Detailbild) **PR**



SCC 250 OS PPG

- verstärkte, schwenkbare Armlehne **ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und -sitz aus PUR-Schaum **PR, PPXL**



SCC 250 OS PPG STE

- verstärkte, schwenkbare Armlehne **ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und -sitz aus PUR-Schaum **PR, PPXL**
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 250 OS DS	590	680-720	985	470	560-600	480	480	400	250	17,5
SCC 250 OS DS ASAOS PR	590	680-720	995	450	560-600	480	480	400	250	19,0
SCC 250 OS PPG	590	680-720	1060	450	560-600	565	400	465	250	27,2
SCC 250 OS PPG STE	670	680-720	1060	540	560-600	565	400	465	250	31,0
SCC 250 OS D	600	680-720	1055	470	560-600	550	385	470	250	26,2
SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS	590	680-720	1055	470	560-600	550	385	470	250	20,9

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die OS-Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle



SCC 250 OS D

- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung **DS**
- verstärkte, schwenkbare Armlehne **ASAXL**



- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Rückenpolster aus dichtem Textilgewebe **RPOS**



- Sitzpolster aus dichtem Textilgewebe **SPOS**

Sitz- und Rückenpolster sollten beim Duschen abgenommen werden.



SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS

- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung **DS**
- verstärkte, schwenkbare Armlehne **ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**

Alle Modelle sind belastbar bis **250 kg**

Bitte beachten Sie bei der Toilettenüberfahrbarkeit die maximal überfahrbare Höhe.

Wir empfehlen bei der Toilettenüberfahrbarkeit die Option Fußstütze MFTOS.

Die Sitzhöhe oder überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.

Farben Sunsire-Gewebe für Rückenbespannungen von Dusch- und Toilettenstühlen



weiß



dunkel-blau



blau



tauben-blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Farben PUR-Schaum für Polsterrücken



graphit



blau



kobalt

Farbe PUR-Schaum für Polstersitz



blau

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster



gelb



rot



blau



grün



anthrazit



Das Topmodell der OS-Reihe

SCC 250 OS PPG 2ASAOS STE

- verstärkte, schwenkbare Armlehne (beidseitig) **2ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz mit Pflegeöffnung aus PUR-Schaum **PR, PPXL**
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**
- belastbar bis 250 kg
- toilettenüberfahrbar
- Bitte beachten Sie das AWT-Maß
- Sitzbreite: 56-60 cm



Abb. mit Option **UR**

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 250 OS PPG 2ASAOS STE	740	680-720	1060	540	560-600	565	400	465	250	34,0
SCC 250 XL DS	590	580-660	985	470	460-540	480	480	400	200	16,0
SCC 250 XL PPG	590	570-650	1060	450	460-540	565	400	465	200	25,5
SCC 250 XL PPG PPE	590	580-660	1060	450	460-540	565	400	465	200	28,2
SCC 250 XL PPG STE	670	580-660	1060	540	460-540	565	400	465	200	31,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die XL-Multifunktions-Dusch- und Toilettenstühle



SCC 250 XL DS

Grundmodell: Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung (optional auch mit Pflegeöffnung), 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe, Toilettentopf mit Skalierung, rückseitige Topfdeckelhalterung, toilettenüberfahrbar



SCC 250 XL PPG

- schwenkbare Armlehne rechts **ASAXL**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz mit Pflegeöffnung aus PUR-Schaum **PR, PPML**



SCC 250 XL PPG STE PPE

wie SCC 250 XL PPG mit

- Einleger für Polstersitz **PPE**
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**



SCC 250 XL PPG STE

wie SCC 250 XL PPG mit

- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**

Alle XL-Modelle sind belastbar bis **200 kg**

Die Sitzhöhe oder überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.

Farben Sunsure-Gewebe

für Rückenbespannungen von Dusch- und Toilettenstühlen



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Farbe PUR-Schaum

für Polsterrücken und Polstersitz



blau



belastbar bis
300 kg



SCC 250 XXXL DSP MFTOS PR STE 300

Alle XXXL-Dusch- und Toilettenstühle werden im personenspezifischen Sonderbau geplant und optimal an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst.

- Doppelrahmen aus RCN Spezialkunststoff mit Aluminium verstärkt
- Polsterrücken aus PUR-Schaum **PR**
- Vollkunststoffsitz mit Pflegeöffnung **DSP**
- 6 x Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 4 mit Feststeller
- trittstabile, ausziehbare Fußstütze

- Sitzbreite: 70 cm
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**
- Toilettentopf mit Skalierung
- nicht toilettenüberfahrbar
- garantiert nicht rostend
- optional: wasserdicht verschweißtes Sitzkissen mit Schaumstoffkern



belastbar bis
400 kg



SCC 250 XXXL DSP 2ASAOS 2MFTOS 2PR STE 400

- beidseitig verstärkte, schwenkbare Armlehne **2ASAOS**
- Doppelrahmen aus RCN Spezialkunststoff mit Aluminium verstärkt
- 2 x Polsterrücken aus PUR-Schaum **2PR**
- Vollkunststoffsitz mit Pflegeöffnung **DSP**
- 6 x Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 4 mit Feststeller
- geteilte, trittstabile, ausziehbare Fußstütze **2MFTOS**

- Sitzbreite: 80 cm
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**
- Toilettentopf mit Skalierung
- nicht toilettenüberfahrbar
- garantiert nicht rostend
- optional: wasserdicht verschweißtes Sitzkissen mit Schaumstoffkern



DR 250 OS PPG

Der RCN Dusch- und Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer

- 24"-Greifreifen
- beidseitig verstärkt schwenkbare Armlehne 2 ASAXL
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze MFTOS
- Polstersitz mit Pflegeöffnung aus PUR-Schaum (nur in der Farbe Blau erhältlich) PPML
- Polsterrücken aus PUR-Schaum PR
- Feststellbremse
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- **hoch stabil, belastbar bis 200 kg, Sitzbreite: 56-60 cm**

Optional: Polstersitzeinleger (siehe Detailbild) PPE

DR 250 XL PPG (ohne Abbildung)

Ausstattung wie DR 250 OS PPG

- **hoch stabil, belastbar bis 200 kg, Sitzbreite: 46-54 cm**

Beide Modelle sind auch ohne Toilettentopf und Halterung erhältlich: DR 100 XL PPG und DR 100 OS PPG



Farbe PUR-Schaum
für Polstersitz und Polsterrücken



blau

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel- länge	Belast- barkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
SCC 250 XXXL DSP MFTOS PR STE 300	735	820	1060	540	700	550	385	300	38,0
SCC 250 XXXL DSP 2ASAOs 2MFTOS 2PR STE 400	735	920	1060	540	800	550	385	400	46,0
DR 250 XL PPG	790	740-820	1010	450	460-540	540	375	175	34,0
DR 250 OS PPG	790	840-880	1010	450	560-600	540	375	200	39,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die RCN Dusch- und Transportliegen

Die RCN Liegen der UDL-Serie können sowohl zum Duschen als auch zum Transportieren von Pflegebedürftigen eingesetzt werden. In bewährter RCN Qualität sind sie die bei Weitem kostengünstigste Alternative zu herkömmlichen Duschliegen.

Die Basis dieser Liegen bildet der Rahmen aus dem RCN Spezialkunststoff, der eine hohe Belastbarkeit, geringes Eigengewicht und eine lange Lebensdauer garantiert.

Die gepolsterte Duschwanne bietet einen hohen Liegekomfort, ist leicht zu reinigen und desinfizierbar. Da der Ablauf verschließbar ist, kann die Wanne mit Wasser befüllt werden. Der Benutzer empfindet ein wohliges Gefühl – fast wie in einer Badewanne. Das Wasser wird

durch einen 90 cm langen Schlauch wieder abgeleitet. Zur leichteren Umlagerung können beide Seitenlehnen heruntergeklappt werden. Zusätzliche Hilfe bietet ein Transferrollboard (siehe Seite 61). Die Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen sind feststellbar und garantiert nicht rostend.

Neben der Standardgröße UDL 1500 ist diese Dusch- und Transportliege noch in den zwei jeweils kleineren Varianten UDL 750 und UDL 500 verfügbar.

Auf Wunsch können die Duschliegen optional mit einem 6-fach verstellbaren Rückenteil (VR) oder einem Keilkissen (DK) ausgestattet werden.

UDL 1500




Hier liegen Sie richtig!

UDL 1500

- gepolsterte Wanne bietet hohen Liegekomfort
- abklappbare Seitenlehnen
- verschließ- und kontrollierbarer Ablauf mit 90 cm langem Schlauch
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- leicht zu reinigen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- garantiert nicht rostend
- 4 Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- bis Körpergröße 182 cm
- bis Schulterbreite 61 cm
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Garantiert nicht rostend!

Bei den Modellen mit Option **VR** ist zusätzlich das Rückenteil 6-fach verstellbar

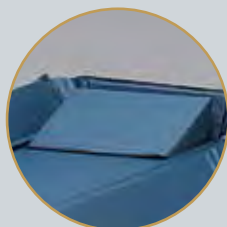

Option Keilkissen **DK**

gepolsterte Duschwanne

abklappbare Seitenlehnen



Option **VR**

verschließbarer Ablauf zum Befüllen der Wanne



Auflagefläche,
Vollkunststoffplatte

RCN Spezialkunststoff-Rahmen

90 cm langer Ablaufschlauch



Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller

Die RCN Dusch- und Transportliegen



UDL 1500 DK

● mit Zusatzoption Keilkissen DK



UDL 1500 VR

● mit Zusatzoption VR
6-fach verstellbares Rückenteil



UDL 500



UDL 750

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
UDL 1500	2020	880	960	1820	610	800	150	51,0
UDL 1500 DK	2020	880	960	1820	610	800	150	52,0
UDL 1500 VR	2020	880	960	1820	610	800	150	55,0
UDL 500	1615	750	965	1460	480	800	150	43,0
UDL 750	1820	805	960	1620	530	800	150	46,0


Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



Wir bauen Ihnen eine Liege mit Ihren Wunschmaßen!

Wir sind Ihr perfekter Partner, wenn es um die Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen geht. Nach dem Motto „Alles ist möglich!“ lösen wir auch die schwierigsten Aufgaben. Wir hören Ihnen genau zu, sprechen mit Ihnen über Ihre Wünsche und erarbeiten konstruktive Vorschläge. Anschließend werden Ihre Vorgaben in unserer Fachabteilung von unseren qualifizierten Mitarbeitern in Pläne und Zeichnungen umgesetzt. So erhalten Sie Ihr individuelles Modell nach Maß – und das passt.

Dank der RCN Modulbauweise können Ihre ganz speziellen Wünsche nicht nur schnell, sondern auch kostengünstig realisiert werden.

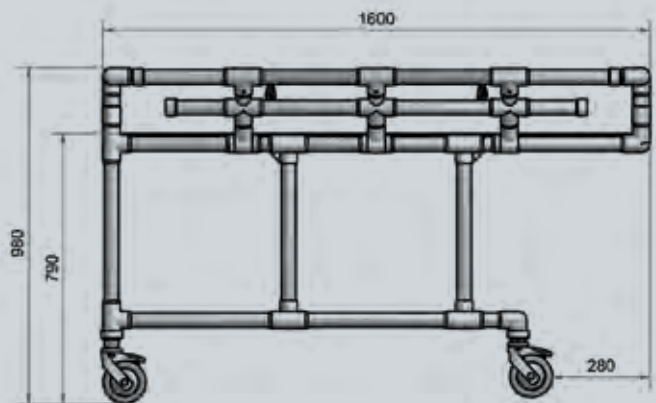

Wie Sie die Maße festlegen, sehen Sie in unserem Video.



Die RCN Dusch- und Transportliegen

Die Modellreihe UDW

Die Duschliegen UDW sind die besonderen Hilfsmittel zum Duschen und Transportieren von Pflegebedürftigen. Über die beidseitigen Fußpedale ist die Höhe der Liegefläche von 490 bis 890 mm stufenlos hydraulisch verstellbar. Die gepolsterte Wanne bietet hohen Liegekomfort, ist leicht zu reinigen und desinfizierbar.

Die Fuß- und Seitenlehnen sind komplett abklappbar und erleichtern dadurch die Umlagerung der Pflegebedürftigen. Die Liegefläche kann durch die umlegbare Kopflehne um 150 mm verlängert und die Neigung der Liegefläche durch eine Gasdruckfeder positiv und negativ bis zu einer Anti-Trendelenburg-Lagerung eingestellt werden.

Der verschließbare Ablauf in Verbindung mit einem 900 mm langen Schlauch gewährleistet einen kontrollierten Wasserablauf. Die freidrehenden Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (4 mit Totalfeststeller) ermöglichen einen sanften und wendigen Transport. Das Rückenteil lässt sich bei den Modellen mit der Option VRW stufenlos über eine Spindel in der Neigung verstellen.



Die höhenverstellbaren Edelstahlduschliegen



UDW 2500 VRW

Liegefläche mit verstellbarem Rückenteil

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 490 bis 890 mm
- Anti-Trendelenburg-Lagerung
- stufenlos verstellbares Rückenteil **VRW**
- belastbar bis 200 kg
- bis Körpergröße: 1850/2000 mm
- bis Schulterbreite: 620 mm
- garantiert nicht rostend

verstellbares Rückenteil, abklappbare Fuß- und Seitenlehnen und umlegbare Kopflehne

gepolsterte Duschwanne

Kurbel für stufenloses Anheben des Rückenteils **VRW**, optional

Gasdruckfeder zur Anti-Trendelenburg-Lagerung

pulverbeschichteter Edelstahlrahmen

Hydraulikzylinder für eine einfache Höhenverstellung und eine belastungsunabhängige Absenkgeschwindigkeit

beidseitig Fußpedale für hydraulische Höhenverstellung von 490 bis 890 mm

Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 4 mit Totalfeststeller

verschließ- und kontrollierbarer Ablauf mit 900 mm langem Schlauch



Garantiert nicht rostend!

Die RCN Dusch- und Transportliegen



UDW 2500

Starre Liegefläche ohne verstellbares Rückenteil

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 490 bis 890 mm
- Anti-Trendelenburg-Lagerung
- gepolsterte Duschwanne
- 900 mm langer Ablaufschlauch
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller, 4 mit Totalfeststeller



UDW 650

Die UDW 650 ist die kleine Ausführung der UDW 2500. Sie besitzt die gleichen Ausstattungsmerkmale und kann auch optional mit dem stufenlos verstellbaren Rückenteil **VRW** ausgestattet werden.

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 490 bis 890 mm
- Anti-Trendelenburg-Lagerung
- gepolsterte Duschwanne
- 900 mm langer Ablaufschlauch
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller, 4 mit Totalfeststeller
- optional mit stufenlos verstellbarem Rückenteil:
UDW 650 VRW

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
UDW 2500	2000	790	700-1100	1850	620	490-890	200	77,0
UDW 2500 VRW	2000	790	700-1100	1850	620	490-890	200	86,0
UDW 4500 XXL VRW	2050	1140	810-1210	1850	950	520-920	400	150,0
UDW 650	1770	710	700-1100	1620	540	490-890	150	69,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Bitte beachten Sie die örtlichen Gegebenheiten, besonders die Tür- und Flurbreiten!

belastbar bis
400 kg



Abgebildet: **UDW 4500 XXL VRW**

UDW 4500 XXL

Die Duschliege UDW 4500 XXL ist die noch höher belastbare Ausführung des UDW 2500 Modells. Sie besitzt die gleiche Ausstattung und ist zusätzlich mit ausziehbaren Schiebegriffen ausgestattet, die ein einfaches Manövrieren gewährleisten. Die XXL-Liege ist hoch stabil und lässt sich über den Spezial-Hydraulik-Zylinder ganz leicht in der Höhe verstellen, auch bei voller Belastung! Die Absenkgeschwindigkeit ist immer konstant, unabhängig von der Belastung. Optional ist auch das stufenlos verstellbare Rückenteil **VRW** erhältlich.

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 520 bis 920 mm
- Anti-Trendelenburg-Lagerung
- gepolsterte Duschwanne
- 900 mm langer Ablaufschlauch
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller, 4 mit Totalfeststeller
- optional mit stufenlos verstellbarem Rückenteil: UDW 4500 XXL VRW



Patienten-Transferboard PTB

Die Umlagerungshilfen sind Ihr perfekter Helfer bei der schonenden und einfachen Umlagerung von Personen aus dem Bett in die Duschliege und wieder zurück.

- aus Kunststoff
- strahlendurchlässig
- belastbar bis 120 kg
- 1800 x 600 mm



Transferrollboard TRB

Das Rollboard eignet sich besonders gut zum schonenden, schmerzfreien und reibungsarmen Transfer von schweren, besonders pflegebedürftigen oder prämedizierten Patienten auf eine Duschliege oder in ein Bett.

- Material Rollboard: Polyethylen
- Material Bezug: Nylon
- belastbar bis 200 kg
- TRB 180: 1800 x 500 mm
- TRB 195: 1950 x 500 mm



DH 49 R

Der ideale Reise-Duschhocker mit komfortablem Sitz, zentraler Pflegeöffnung und rutschsicheren Spezialfüßen ist schnell ohne Werkzeug zerlegt und eingepackt.

Optional auch mit Polsterauflage **PA** erhältlich. Der Hocker wiegt 3,8 kg und ist belastbar bis 150 kg. Tasche: 430 x 430 x 190 mm



DH 49 R PA

Der Reise-Duschhocker mit Option Polsterauflage



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 49 R	420	420	480	420	420	470	150	4,0
SCC 250 R	555	555	815-890	470	440	470-545	150	12,3

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

SCC 250 R

Mit diesem multifunktionalen Dusch- und Toilettenstuhl müssen Sie auch auf Ihrer Reise auf keinen Komfort verzichten: Er ist schnell werkzeuglos auf- und abgebaut und in der dazugehörigen Tasche einfach zu transportieren.

Trotz des geringen Eigengewichts von nur 10,8 kg ist er außerordentlich stabil und bis zu 150 kg belastbar.



- schnell werkzeuglos auf- und abbaubar
- mit praktischer Tragetasche aus Sunsure-Gewebe
- Rückenlehne mit Polster aus PUR-Schaum
- Armlehnen mit Polster aus PUR-Schaum
- Höhenverstellung (5 Höhen einstellbar)
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg



beidseitig schwenkbare Armlehne 2ASA



Höhenverstellung HV, 5 Sitzhöhen einstellbar



Farben Sunsure-Gewebe für Tragetaschen



weiß



dunkelblau



blau



taubenblau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Farben PUR-Schaum für Rücken- und Armlehnen



graphit



blau



kobalt

SCC 250 KB

Der platzsparende Dusch- und Toilettenstuhl!
Der SCC 250 KB kann ganz leicht geklappt und somit platzsparend verstaut werden.

- ergonomisch geformte Toilettenbrille
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe
- Toilettentopf mit Skalierung
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
SCC 250 KB	545	555	970	490	440	515	150	9,0

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
SM 700 FBS	1125	1065	1130	430	550	510	150	40

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Farben Sunsure-Gewebe für Rückenbespannung und Polster



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti



Das Strandmobil SM 700 FBS

Das als Schieberollstuhl konzipierte Strandmobil SM 700 FBS aus weißem RCN Spezialkunststoff – bruchsicher, absolut rostfrei, UV-beständig – kann dank seiner großen Niederdruck-Ballonreifen überall dort gefahren werden, wo der weiche oder unebene Untergrund normale Rollstühle vor unlösbare Probleme stellt.

- mit Feststellbremse
- schwenkbare Armlehne rechts
- mit praktischer Utensilentasche
- absolut rostfrei
- meerwasserbeständig
- die Alternative für nicht befestigte Böden und Sandstrände
- belastbar bis 150 kg

Die atmungsaktiven Sitz- und Rückenpolster ermöglichen auch an sonnigen und heißen Tagen einen unbeschwer-ten Aufenthalt im Strandmobil. Für den Transport lässt sich der Sitz mit wenigen Handgriffen vom Fahrgestell abheben und separat verstauen. Das optionale Zubehör, wie z. B. ein Sonnenschirm, ein einfach über den Arm-lehnen zu befestigender Sicherheitsbügel und eine Feststellbremse, rundet das Angebot ab.

Das Strandmobil SM 700 FBS, ein Hilfsmittel, das ganz neue Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung von bewegungseingeschränkten Menschen erschließt.

Optionen:

- Sicherheitsbügel SBS
- Sonnenschirm mit Halter SO





Der KSC 180, die beste Lösung in den Funktionsbereichen Dusche, Toilette und Transport.

KSC 180 FT RP SP

- Höhenverstellung: Ermöglicht eine optimale Anpassung der Sitzhöhe an das Wachstum des Kindes (7 Höhen einstellbar), serienmäßig
- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung
- ausziehbare Fußstütze FT
- Rückenbespannung aus Sunsüre-Gewebe
- Sitzpolster SP und Rückenpolster RP mit Schaumstoffkern und Bezug aus strapazierfähigem Sunsüre-Gewebe
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- Toilettentopf mit Skalierung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Höhenverstellung der Sitzhöhe per Drehclip von 375 bis 525 mm

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
KSC 180 FT RP SP	555	460	840-995	415*	350	375-525*	250-400	295-445	150	12,5
KSC 180 ASA FT PPK RP	565	520	850-950	415*	400	420-520*	300-400	310-410	150	9,5

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

* ohne Polster

Der Dusch- und Toilettenstuhl KSC 180



Rückenpolster mit Schaumstoffkern, Bezug aus Sunsurre-Gewebe **RP**, optional



Sitzplatte mit Polster, Bezug aus Sunsurre-Gewebe **SP**, optional



Rückenbespannung aus Sunsurre-Gewebe, Standard



Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung und -topf mit Skalierung, Standard



ausziehbare und kippsichere Fußstütze **FT**, optional



ausschwenkbare Armlehne **ASA**, optional



Sicherheitsbügel **SB**, optional



Polstersitz mit Pflegeöffnung **PPK**, optional



KSC 180 ASA FT PPK RP

- Höhenverstellung (7 Höhen einstellbar)
- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung
- Polstersitz mit Pflegeöffnung **PPK** in der Farbe Grau
- ausschwenkbare Armlehne **ASA**
- ausziehbare Fußstütze **FT**
- Rückenbespannung aus Sunsurre-Gewebe
- Rückenpolster **RP** mit Schaumstoffkern und Bezug aus strapazierfähigem Sunsurre-Gewebe
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- Toilettentopf mit Skalierung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Die Sitzhöhe oder überfahrbare Höhe kann auf Wunsch bei allen Modellen ohne Mehrpreis angepasst werden.

Farben Sunsurre-Gewebe für Rückenbespannung und Polster



weiß



dunkel-blau



blau



tauben-blau



altrosa




laguna



gelb



konfetti

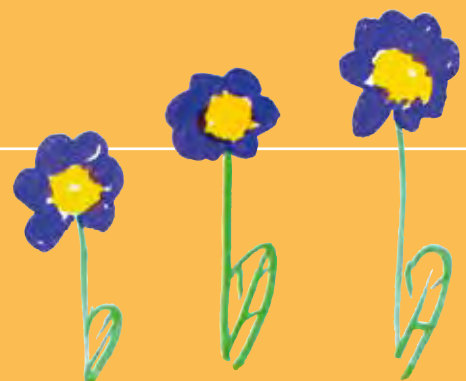



DR 400 Mini SB,
der Kinderrollstuhl für Selbstfahrer

- 20"-Greifreifen
- Armlehnen mit Armpolstern aus PUR-Schaum
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern
- Polsterbezüge aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- abklappbare Fußstütze
- 2 Feststellbremsen
- Sicherheitsbügel **SB** mit Polster aus PUR-Schaum
- Schiebegriff
- Kleiderschutz beidseitig
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- belastbar bis 120 kg

Farben PUR-Schaum für Armlehnenpolster



graphit blau kobalt

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Polster



gelb rot blau grün anthrazit



DR 100 Mini S

Der DR 100 Mini S ist das optimale Hilfsmittel für Dusche, Schwimmbad und Hydrotherapie. Er steht sicher auf nassem Untergrund und ist absolut nicht rostend. Er ist damit ideal geeignet für Rehakliniken sowie für bewegungseingeschränkte Kinder und Jugendliche, die sich unabhängig fortbewegen wollen.

- 20"-Greifreifen
- 2 Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen
- Vollkunststoffsitz mit Wasserablaufbohrungen
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- ausziehbare Fußstütze **FT**
- beidseitig abnehmbare Armlehnen **2ASA**
- belastbar bis 120 kg

Farben Sunsure-Gewebe für Rückenbespannung



weiß dunkelblau blau taubenblau altrosa laguna



gelb konfetti

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
DR 400 Mini SB	740	635	1010	400	360	480	340	120	23,0
DR 100 Mini S	750	640	760	380	360	470	350	120	18,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



KDL 200

Die Dusch- und Badeliegen KDL sind das optimale Hilfsmittel zur Nutzung in Badewannen und Duschen. Dabei unterstützen sie bei der Pflege von Kindern, die nicht sitzen können.

Die KDL sind sowohl im Rücken- als auch im Beinbereich stufenlos verstellbar und die strapazierfähige Bespannung aus Sunsure-Gewebe ist komfortabel,

wasserabweisend und leicht zu reinigen. Sie passt sich schnell der Körpertemperatur an und wirkt so unterstützend für eine angenehme Pflege.

Die Dusch- und Badeliege ist auch in einer kleineren Ausstattung als KDL 100 erhältlich.

- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- stufenlos verstellbares Fuß- und Rückenteil
- robuste Bespannung aus Sunsure-Gewebe
- absolut nicht rostend
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Stufenlose Positionierung des Fuß- und Rückenteils

Farben Sunsure-Gewebe für Bespannung



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna




gelb



konfetti

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	Rückenteil	Sitzfläche	Fußteil		
KDL 100	1100	485	270	400	400	300	75	7,0
KDL 200	1400	485	270	500	500	400	100	9,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

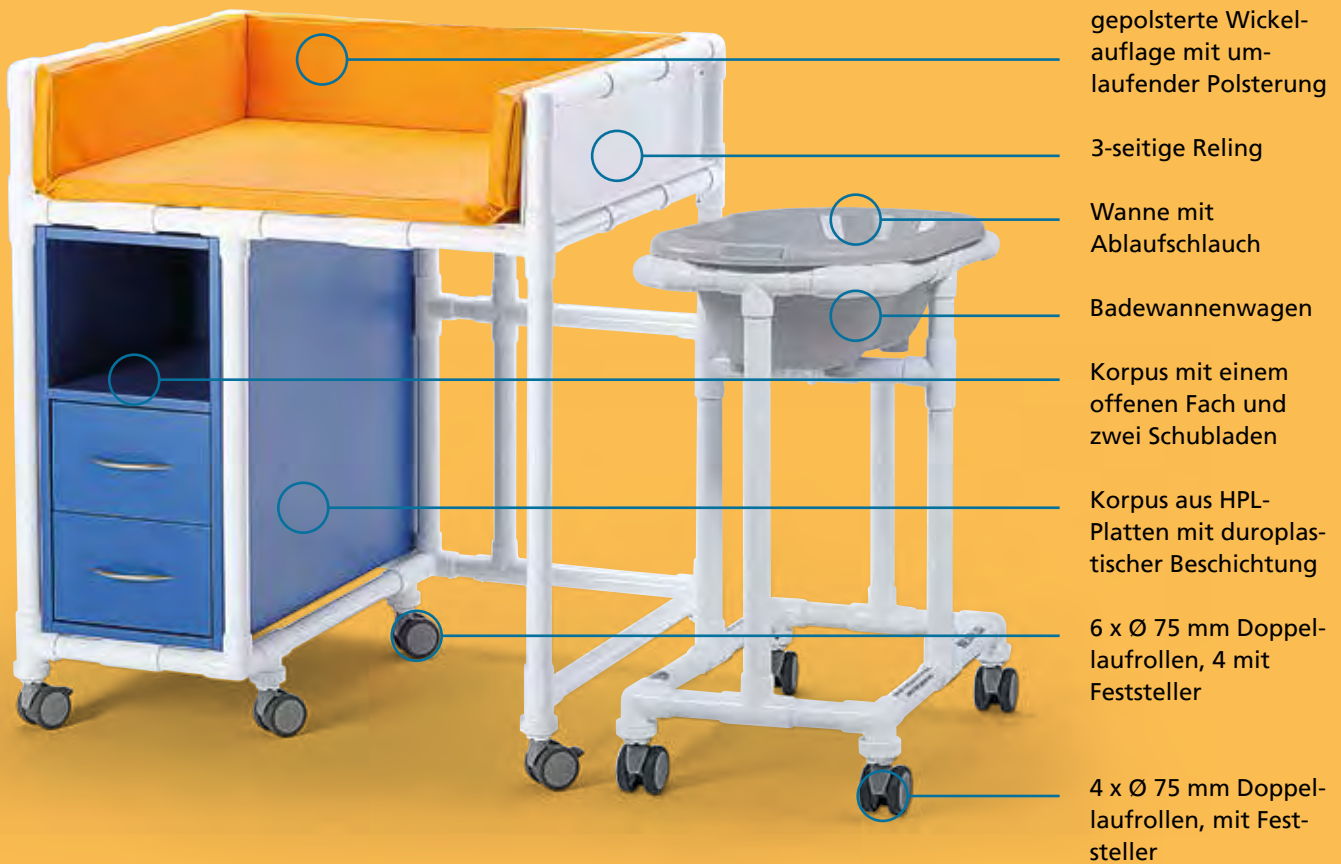

WK 07

Die fahrbare Wickelkommode WK 07 erleichtert die Pflege von Babys erheblich. Die gepolsterte Wickelfläche hat eine angenehme Arbeitshöhe von 970 mm und kann auf Wunsch angepasst werden. In der seitlichen Korpuseinheit finden Sie ausreichend Platz für alle nötigen Pflegeutensilien und in Verbindung mit der fahrbaren

Babybadewanne haben Sie immer alles in Reichweite. Die verwendeten Materialien sind alle urin-, blut- und desinfektionsmittelbeständig. Die Babybadewanne **BWR 200** ist bei der Wickelkommode WK 07 serienmäßig enthalten.

mit **BWR 200**:

- Rahmen aus stabilem, UV- und desinfektionsmittelbeständigem RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- gepolsterte Wickelauflage (30 mm Schaumstofffüllung) mit 3-seitig gepolsterter Reling
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Korpuseinheit mit einem offenen Fach und zwei Schubladen
- 6 x Ø 75 mm Doppellaufrollen, 4 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

- fahrbare Babybadewanne
- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Wanne in Blau mit ca. 700 mm langem Ablaufschlauch
- 4 x Ø 75 mm Doppellaufrollen, mit Feststeller
- absolut nicht rostend



Die fahrbare Babybadewanne kann platzsparend unter der Wickelkommode verstaut werden.

Die BWR 200 können Sie auch einzeln ohne die Wickelkommode erwerben.

Die Wickelkommode WK 07

Die RCN Wickelkommode WK 07 WL

Der Wärmestrahler IW 980 AGU wurde speziell für eine geregelte Wärmezufuhr entwickelt. Er schützt die Babys vor dem Auskühlen und sorgt für die Aufrechterhaltung der richtigen Körpertemperatur.

In Verbindung mit dem Hauttemperatursensor gewährleistet der Wärmestrahler eine gleichbleibende Hauttemperatur, indem die Heizleistung automatisch den physiologischen und den Umgebungsbedingungen angepasst wird. Dies geschieht mittel eines Mikroprozessors, der die Hauttemperatur 10 Mal pro Sekunde misst. So sind Babys beim Wickeln und Pflegen wesentlich entspannter und fühlen sich wohler.



Ausstattung und Merkmale wie bei WK 07, zusätzlich mit:

- geprüftem Halter für Wärmestrahler
- Wärmestrahler IW 980 AGU
- Hauttemperatursteuerung
- DuoSense Hauttemperatursensor
- SunSpot Sensorschutz
- Infusionsshaken



Wärmestrahler seitlich wegschwenkbar

Modell: WK 07	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Außenabmessungen	1010	860	1170	74,0
Wickelfläche	825	760	970*	–
Schubladen Innenmaße	240	580	160	–
BWR 200	455	775	875	8,6


Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

*Höhe Arbeitsfläche

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe
für Wickelauflage-Polster



Farben für Korpus

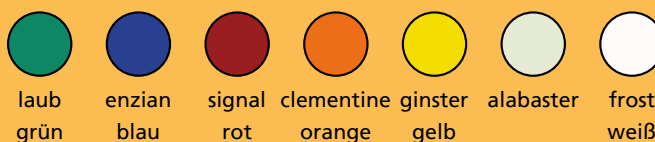

Der RCN Gehwagen

Der RCN Gehwagen bietet wie keine andere Gehhilfe dem bewegungseingeschränkten Benutzer Sicherheit beim Gehen. Er wurde speziell für die Mobilisierung und das Bewegungstraining von Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt und ist das ideale Hilfsmittel für sturzgefährdete Personen. Er unterstützt die Bewegungstherapie und regt sturzgefährdete Menschen zu mehr Eigenmobilität an. Der rundum geschlossene Rahmen mit integriertem Polstersitz, der Sicherheitsbügel

und -gurt vermitteln ein Gefühl der Sicherheit. Sich jederzeit selbst setzen zu können oder von dem Sicherheitsgurt aufgefangen zu werden, nimmt die Angst vor folgenschweren Stürzen. Dies wirkt sich positiv auf die Bewegungsbereitschaft und auf das Allgemeinbefinden der Benutzer aus und hilft, Fixierungen zu vermeiden.

Der Gehwagen erfüllt eine wichtige Brückenfunktion zwischen dem klassischen Rollator und dem Rollstuhl.



Einzigartig mit seinen 12 Qualitätspunkten!



Der RCN Gehwagen wird aus besonders stabilen RCN Spezialkunststoff-Modulen hergestellt. Dadurch ist er sehr belastbar.



Da bei RCN der Faktor „Sicherheit“ an erster Stelle steht, ist unser Gehwagen von TÜV und unabhängigen, akkreditierten Prüflaboren getestet worden.



Der Sicherheitsgurt wird straff am Sicherheitsbügel befestigt. Sollte der Nutzer stolpern, wird er sanft von dem Gurt aufgefangen.



Der umlaufende Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff gewährt noch bessere Standfestigkeit und Sicherheit bei der Fortbewegung.



Durch die Höhenverstellung können 7 Höhen ausgewählt und der Gehwagen somit per Drehclip optimal auf den Nutzer eingestellt werden.



Die 6 x Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen sind besonders wendig, 4 davon sind mit Feststeller.



Der Polstersitz besteht aus einem hygienischen und bequemen PUR-Schaum und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sich jederzeit zu setzen.



Die Rückenbespannung aus atmungsaktivem Sunsure-Gewebe lässt sich leicht reinigen und ist desinfektionsmittelbeständig.



Der Gehwagen besitzt eine Hilfsmittelnummer und kann mit der Krankenkasse abgerechnet werden.



Die praktische Tasche aus Sunsure-Gewebe bietet Platz für Utensilien und wird mit Druckknöpfen an der Armlehne befestigt.



Wir sind absolut überzeugt von der Qualität unseres Produktes und gewähren auf den besonders stabilen sowie belastbaren RCN Spezialkunststoff-Rahmen 5 Jahre Garantie.



Der RCN Gehwagen wird in unserem Werk in Deutschland gefertigt. Wir setzen dabei sowohl auf neueste Technologien und Materialien als auch auf echte Handarbeit.



Unser Grundmodell GW 120:

- gibt den Benutzern mehr Sicherheit, Unabhängigkeit und Lebensqualität
- hilft, Fixierungen zu vermeiden
- Polstersitz aus hygienischem PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen
- praktische Tasche
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Doppellaufrollen, Ø 75 mm, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache, 6-fache Höhenverstellung mit Drehclip
- belastbar bis 150 kg
- Hilfsmittelnummer: **10.46.02.0006**

Farben Sunsüre-Gewebe für Rückenbespannung und Tasche



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Farbe PUR-Schaum für Polstersitz



graphit

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Griffhöhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
GW 120	990	785	1075-1225	325	445	525-675	785-935	150	18,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Zusatzoptionen



GIH
Infusionsflaschen-
halter

GSB Servierbrett/
Therapietisch

GGP Gurtpolster

GWSP Zusatzpolster
für Sitzfläche

GKGW Gel-Sitzkissen
(nicht abgebildet)

GFT Fußstütze

AFS Anfahrerschutz

GIH Der Infusionsflaschenhalter wird ganz einfach mit zwei Drehclips am hinteren Rahmen befestigt. Der Nutzer kann dank des Halters wichtige Infusionen stets sicher mit sich führen.

GSB Der Therapietisch wird ganz einfach auf die beiden Armlehnen aufgesteckt. Dem Nutzer dient der Tisch insbesondere während der Gehpause als Ablagefläche.

GGP Das Gurtpolster wird einfach um den Sicherheitsgurt gelegt und mit Klettverschluss befestigt. Der Nutzer wird dank des Polsters noch weicher aufgefangen.

GWSP Mit dem Zusatzpolster wird das Sitzen für den Nutzer noch komfortabler.

GKGW Gel-Sitzkissen aus hochwertigem und außergewöhnlichem elastischem Gel (RCN-Elastan-Gel) gefertigt (siehe Seite 42 für weitere Informationen).

GFT Je nach Größe des Nutzers kann die Fußstütze eine sinnvolle Ergänzung sein. Während der Gehpausen kann er sich setzen und die Füße abstellen. Die Fußstütze kann einfach nach vorne bzw. hinten geschoben und sogar abgenommen werden.

AFS Mit dem Rundum-Anfahrerschutz aus PUR-Schaum werden Zusammenstöße abgefedert und Möbel, Wände, Türen etc. geschützt. Der Anfahrerschutz verhindert außerdem das „Einfädeln“ des Gehwagens unter Einrichtungsgegenständen (z. B. unter einem Stuhl).



GW 120 Mini

Unser Modell für Personen mit geringer Körpergröße

- Körpergröße bis 155 cm
- Sitzpolster aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- Rückenbespannung aus Sunsüre-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Doppellaufrollen, Ø 75 mm, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung, 7 Höhen einstellbar
- praktische Tasche
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



GW 120 Maxi

Unser Modell für große und schwergewichtige Personen

- bis 200 kg belastbar
- Sitzpolster aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- Rückenbespannung aus Sunsüre-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 8 hochwertige Doppellaufrollen, Ø 75 mm, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung, 7 Höhen einstellbar
- praktische Tasche
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Griffhöhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
GW 120 Mini	890	720	885-1035	260	385	390-540	595-745	150	16,0
GW 120 Maxi	1125	835	1040-1190	340	500	450-600	750-900	200	30,5
CW 300	1055	780	1150-1300	–	–	–	1020-1170	150	20,5

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Unser Grundmodell und seine Varianten

Combo-Walker CW 300

Dieser Gehtrainer wird insbesondere bei Patienten zum Mobilitätstraining eingesetzt, die sich nicht mehr ausreichend sicher mit den Händen abstützen können. Die gepolsterte Unterarmauflage ist so positioniert, dass die Unterarme bis zum Ellbogen optimal aufgelegt werden können.

Falls erforderlich, kann der Patient mittels eines Gurtes mit integriertem Sitz zusätzlich gesichert werden,

wodurch auch die Möglichkeit eines Intervalltrainings – abwechselnd gehen und sitzen – ermöglicht wird.

Der obere Rahmen mit Polsterauflage und Sitzgurtaufhängung ist höhenverstellbar von 1020 mm bis 1170 mm in 25-mm-Schritten. Optionen auf Anfrage.



CW 300

- ideales Hilfsmittel für Intervalltraining (abwechselnd gehen und sitzen)
- Unterarmauflage mit Polster aus PUR-Schaum
- oberer Rahmen mit Polsterauflage und Sitzgurtaufhängung höhenverstellbar von 1020 mm bis 1170 mm (in 25-mm-Schritten)
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- zusätzliche Optionen auf Anfrage

Farben Sunsured-Gewebe für Rückenbespannung und Tasche



Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitzpolster



ISO-Modulkorbwagen MEW

Die ISO-Modulkorbwagen von RCN der MEW-Reihe sind nicht nur qualitativ hochwertig und langlebig, sondern auch einfach in der Handhabung und Reinigung. Alle Wagen haben einen Rahmen aus dem RCN Spezialkunststoff, der ein hohes Maß an Stabilität und Robustheit gewährleistet.

Die farbenfrohen Korpusse sind in sieben Farben erhältlich und werden aus 19,6 mm starken HPL-Platten gefertigt. Diese bestehen aus einer 18 mm Pappelsperholzträgerplatte, auf die beidseitig die 0,8 mm starke duroplastische Beschichtung unter Hochdruck aufgetragen wurde. Durch die duroplastische Beschichtung ist

der Korpus besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, Desinfektionsmittel- und UV-beständig.

Die Wagen der MEW-Reihe haben folgende Merkmale:

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Korpus aus HPL-Platten
- abschließbare Schublade
- Modulkorb-fach mit abschließbaren Drehtüren
- durchgehende Trägerwände im Modulkorb-fach
- 3-seitige Aufkantung
- Schiebegriff



Das praxisoptimierte Organisationssystem

In wenigen Schritten können Sie sich Ihren individuellen ISO-Modulkorbwagen zusammenstellen:

1. Grundmodell auswählen. Die beiden Modelle MEW 100 und MEW 200 unterscheiden sich in der Innenhöhe des Modulkorb-faches:
MEW 100: 625 mm
MEW 200: 1035 mm
2. Die benötigten ISO-Modulkörbe mit optionalen Längs- und Querteilern auf der nächsten Seite ermitteln
3. Hilfreiche Optionen hinzufügen
4. Die gewünschte Farbe für Ihren Korpus auswählen
5. Fertig ist Ihr individueller ISO-Modulkorbwagen

HSP Handschuhspender,
Dreifach-Handschuhspender
D-HSP, optional

3-seitige Aufkantung

ESP Desinfektionsmittelspender
mit **ATS** Abtropfschale, optional

abschließbare Schublade mit
optionaler Unterteilung

SPA verstellbarer Halter mit
Spritzenabwurfbehälter, optional

Schiebegriff

individuelle Bestückung mit ISO-
Modulkörben, Auswahl siehe
nächste Seite

durchgehende Trägerwand für
Modulkörbe

Rahmen aus RCN Spezialkunststoff

abschließbare Drehtüren

Korpus aus HPL-Platten mit
duroplastischer Beschichtung

Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-
Doppelradrollen, 2 mit Feststeller



D-HSP



HSP



ESP



ATS



SPA

Weitere Ausstattungsoptionen:



SPL-A
abklappbare
Schreibplatte



TH
Tablet-Halterung



ABH-S
Sensorabfalleimer,
40 l



ABH
Abfallbehälter, 35 l



ABH-10
Abfallbehälter, 10 l



ABW
Kniedruck-Abfall-
behälter, 20 l

ISO-Modulkorbwagen MEW

RCN bietet Ihnen zur optimalen Konfiguration Ihrer individuellen Wagen ISO-Modulkörbe in drei verschiedenen Höhen an. Diese erhalten Sie in zwei verschiedenen Farben und Sie können die ISO-Modulkörbe beliebig mit Längs- und Querteilern ausstatten.


Die ISO-Modulkörbe erhalten Sie:

- in den Höhen 50 mm, 100 mm und 200 mm
- in den Farben Grau und Transparent
- mit oder ohne Längs- und Querteiler


Bitte beachten Sie die Innenhöhe des entsprechenden Modulwagens:


- Modell MEW 100: Innenhöhe 625 mm
- Modell MEW 200: Innenhöhe 1035 mm


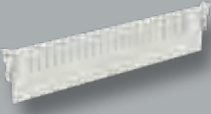


Korb 50	Bezeichnung	Farbe	Maße (B x T x H in mm)
	ISO-Modulkorb 50 aus ABS	grau	600 x 400 x 50
	ISO-Modulkorb 50 aus Polycarbonat	transparent	600 x 400 x 50
	Längs- und Querteiler 50 aus ABS für ISO-Modulkorb 50	grau	600 x 50 400 x 50
	Längs- und Querteiler 50 aus Polycarbonat für ISO-Modulkorb 50	transparent	600 x 50 400 x 50

Alles in bester Ordnung!

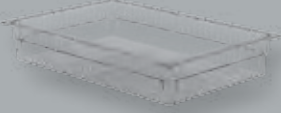Korb 100	Bezeichnung	Farbe	Maße (B x T x H in mm)
	ISO-Modulkorb 100 aus ABS	grau	600 x 400 x 100
	ISO-Modulkorb 100 aus Polycarbonat	transparent	600 x 400 x 100

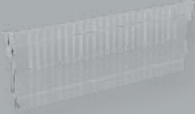	Längs- und Querteiler 100 aus ABS für ISO-Modulkorb 100	grau	600 x 100 400 x 100
	Längs- und Querteiler 100 aus Polycarbonat für ISO-Modulkorb 100	transparent	600 x 100 400 x 100

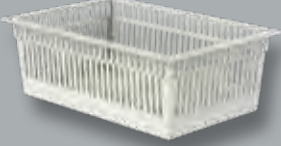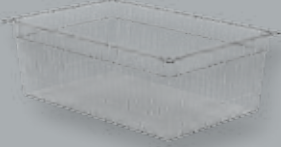Korb 200	Bezeichnung	Farbe	Maße (B x T x H in mm)
	ISO-Modulkorb 200 aus ABS	grau	600 x 400 x 200
	ISO-Modulkorb 200 aus Polycarbonat	transparent	600 x 400 x 200

	Längs- und Querteiler 200 aus ABS für ISO-Modulkorb 200	grau	600 x 200 400 x 200
	Längs- und Querteiler 200 aus Polycarbonat für ISO-Modulkorb 200	transparent	600 x 200 400 x 200

ISO-Modulkorbwagen MEW 90 Basic – der perfekte Einstieg in die MEW-Reihe

Der MEW 90 Basic ist das ideale Einstiegsmodell in die Welt der hochwertigen ISO-Modulkorbwagen von RCN. Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dieser Wagen eine langlebige, stabile und leicht zu reinigende Lösung für den professionellen Einsatz.

Hochwertige Verarbeitung für maximale Langlebigkeit

Der robuste Rahmen besteht aus dem bewährten RCN Spezialkunststoff, der sich durch eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Der Korpus ist standardmäßig in Blau erhältlich und kann auf Wunsch gegen Aufpreis in fünf weiteren Farben geliefert werden. Die Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung sorgen für eine widerstandsfähige und pflegeleichte Oberfläche.

Praktische und durchdachte Ausstattung

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Doppelradrollen, davon zwei mit Feststellbremse für sicheren Stand
- Modulkorb-fach mit abschließbaren Drehtüren für mehr Sicherheit und Ordnung
- durchgehende Trägerwände für eine optimale Lastverteilung im Modulkorb-fach
- Vollkunststoffabdeckung schützt die Holzwerkstoffplatte vor Feuchtigkeit und Schmutz
- seitliche und hintere Aufkantung, werkzeuglos abnehmbar, für zusätzlichen Schutz



Perfekt für den professionellen Einsatz

Der MEW 90 Basic bietet eine durchdachte Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und einfacher Handhabung. Ob im medizinischen Bereich, in der Pflege oder in anderen professionellen Umgebungen – dieser ISO-Modulkorbwagen überzeugt durch seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie die Welt der RCN ISO-Modulkorbwagen und profitieren Sie von einem langlebigen, einfach zu reinigenden und kostengünstigen Einstieg mit dem MEW 90 Basic!



- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Korpus aus Holzwerkstoffplatte
- Modulkorb-fach mit abschließbaren Drehtüren
- durchgehende Trägerwände im Modulkorb-fach
- 2 x ISO-Modulkorb 50, grau, 600 x 400 x 50 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 3 x ISO-Modulkorb 100, grau, 600 x 400 x 100 mit jeweils einem Längs- und Querteiler

- 1 x ISO-Modulkorb 200, grau, 600 x 400 x 200 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- Vollkunststoffabdeckung
- Desinfektionsmittelspender ESP
- Abtropfschale ATS
- Handschuhspender HSP

Standardfarbe für Korpus



blau

Wunschfarben für Korpus



grün



rot



orange



gelb



weiß

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Arbeitsfläche	Abmessungen Arbeitsfläche (B x T)	Verfügbare Innenhöhe für Modulkörbe	Gewicht
MEW 90 Basic	550	775	1470	1075	618 x 467	795	56,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



MEW 75

- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Korpus aus HPL-Platten
- durchgehende Trägerwände im Modulkorbfach
- 2 x ISO-Modulkorb 50, grau, 400 x 300 x 50 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 2 x ISO-Modulkorb 100, grau, 400 x 300 x 100 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 1 x ISO-Modulkorb 200, grau, 400 x 300 x 200 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- Desinfektionsmittelspender ESP
- Abtropfschale ATS
- Handschuhspender HSP



MEW 75 Plus

- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Korpus aus HPL-Platten
- abschließbare Tür
- Desinfektionsmittelspender ESP auf Gleitschiene
- Abtropfschale ATS
- Handschuhspender HSP auf Gleitschiene
- Tablet-Halterung TH
- verstellbarer Halter mit Spritzenabwurfbehälter SPA
- Kniedruck-Abfallbehälter ABW
- 3-seitige Aufkantung
- Schiebegriff
- 7 x ISO-Modulkorb 50
- 1 x ISO-Modulkorb 100
- alle ISO-Modulkörbe sind auf kugelgelagerten Teleskopauszügen mit 10 % Überauszug eingehängt

Farben für Korpus



laub
grün



enzian
blau



signal
rot



clementine
orange



ginster
gelb



alabaster



frost
weiß



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Arbeitsfläche	Abmessungen Arbeitsfläche (B x T)	Verfügbare Innenhöhe für Modulkörbe	Gewicht
MEW 75	500	480	1405	1040	355 x 465	795	38,0
MEW 75 Plus	500	480	1435	1040	355 x 445	795	46,0
MEW 100 S	525	895	1455	1060	615 x 485	625	58,0
MEW 200 S	525	1000	1580	1460	615 x 485	1035	85,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

MEW Modelle, Ausstattung und Optionen



MEW 100 S

- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Korpus aus HPL-Platten
- abschließbare Schublade mit Aufteilung
- Modulkorb-fach mit abschließbaren Drehtüren
- durchgehende Trägerwände im Modulkorb-fach
- 2 x ISO-Modulkorb 50, grau, 600 x 400 x 50 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 2 x ISO-Modulkorb 100, grau, 600 x 400 x 100 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 1 x ISO-Modulkorb 200, grau, 600 x 400 x 200 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 3-seitige Aufkantung
- Schiebegriff
- Desinfektionsmittelspender ESP
- Abtropfschale ATS
- Spritzenabwurfbehälter SPA
- Handschuhspender HSP



MEW 200 S

- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Korpus aus HPL-Platten
- abschließbare Schublade mit Aufteilung
- Modulkorb-fach mit abschließbaren Drehtüren
- durchgehende Trägerwände im Modulkorb-fach
- 3 x ISO-Modulkorb 50, grau, 600 x 400 x 50 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 3 x ISO-Modulkorb 100, grau, 600 x 400 x 100 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 2 x ISO-Modulkorb 200, grau, 600 x 400 x 200 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 3-seitige Aufkantung
- Schiebegriff
- Desinfektionsmittelspender ESP
- Abtropfschale ATS
- Spritzenabwurfbehälter SPA
- Dreifach-Handschuhspender D-HSP
- abklappbare Schreibplatte SPL-A

Option: Unterteilung der Schublade bei MEW 100 und MEW 200

Die Schubladen der MEW Modelle können mit 2 Längsteilern aus Aluminium und 4 Querteilern aus Polycarbonat-Kunststoff ausgestattet werden. Die Längsteiler sind über die ganze Tiefe verfügbar, die Querteiler teilen immer nur ein Längsfach. Nutzfläche der Schublade: 555 x 435 mm (B x T)



Sammeln, sortieren und bewegen – mit System

Die RCN Wäschesammler – die attraktive und geräuscharme Alternative zu herkömmlichen Systemen

SLH 022 FP



Die RCN Wäschesammler

- serienmäßig mit geräuschgedämpftem Deckel ausgestattet
- besonders wendig durch Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- einfaches und langlebiges Wäschesack-Befestigungssystem
- absolut kein Abrutschen des Wäschesackes

- die Deckel sind in 5 verschiedenen Farben erhältlich
- alle Deckel haben einen Überstreckungsschutz
- sehr stabil und standsicher durch RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- einfache Reinigung durch werkzeuglose Demontage der Deckel
- Sammler sind mit bis zu 5 Abwürfen erhältlich


Einfache Befestigung der Wäschesäcke in 3 Schritten:

Deckel in 5 verschiedenen Farben erhältlich



1. Deckel öffnen und plastifizierte Edelstahl-Bügel anheben

Rahmen aus RCN Spezialkunststoff

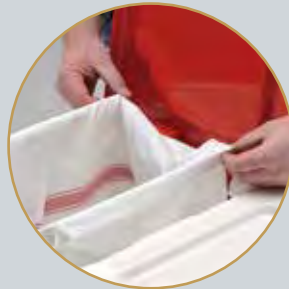

2. Wäschesack über die Bügel legen und nach unten drücken

WSW selbstentleerende Polyester-Wäschesäcke mit Knebelverschluss, Vollschnitt, in 4 verschiedenen Farben erhältlich, optional



3. der Wäschesack hält sicher und ist bereit für den Einsatz

FP Deckelöffnung über stabiles Fußpedal, optional



Deckel mit Überstreckungsschutz, kein Ab- oder Ausreißen möglich

Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller



SLH 021 FP

Wäschesammler

- 1 Abwurf
- mit Fußpedal FP



SLH 023 FP

Wäschesammler

- 3 Abwürfe
- mit Fußpedalen FP



SLH 022

Wäschesammler

- 2 Abwürfe
- optional mit FP (SLH 022 FP)



SLH 024 FP

Wäschesammler

- 4 Abwürfe
- mit Fußpedalen FP

Alle Wäschesammler sind mit der Option Wäschesack (WSW) abgebildet.

Ausstattungsoptionen für den Wäschesammler SLH



Gleitschiene GL mit Desinfektionsmittelpender und Handschuhspender, optional



Halterung mit Desinfektionsmittelpender, optional



GR Schiebegriff, optional



HSP Handschuhspender aus pulverbeschichtetem Aluminium, optional



ESP Desinfektionsmittelpender für 0,5-Liter-Flaschen geeignet, optional



ATS Abtropfschale, optional



SC SoftClose, optional



WSW selbstentleerende Polyester-Wäschesäcke mit Knebelverschluss, Vollschnitt, in 4 verschiedenen Farben erhältlich, optional



WSD wasserdicht verschweißte, waschmaschinenfeste Dichtsäcke für besonders stark durchnässte Schmutzwäsche, in 4 verschiedenen Farben erhältlich, optional



FP Deckelöffnung über stabiles Fußpedal, optional



KP Koppelsystem, einfach zu bedienendes System zum Koppeln von Sammlern und Wagen, optional

Deckelfarben



weiß



gelb



rot



grün



blau

Farben für Wäschesäcke WSW



grün



blau



rot



gelb

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Anzahl der Abwürfe	Fassungsvermögen in Liter/kg
SLH 021 FP	505	400	1005	9,0	1	1 x 120 / 35
SLH 022	450	735	1005	11,0	2	2 x 120 / 35
SLH 022 FP	505	735	1005	12,0	2	2 x 120 / 35
SLH 023 FP	505	1065	1005	17,0	3	3 x 120 / 35
SLH 024 FP	505	1410	1005	20,0	4	4 x 120 / 35

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



SLH 022 FP ESP HSP ATS

- 2 Abwürfe mit Option **WSD**
- Fußpedalen **FP**
- Halterung auf beiden Seiten
- Abtropfschale **ATS**
- Desinfektionsmittelspender **ESP**
- Handschuhspender **HSP**



Praktische Blockkombinationen

mit 3 oder 4 Wäschesammlern. Fest verbunden oder durch Koppelsystem flexibel kombinierbar.



SLH 023 B FP

- 3 Abwürfe
- Fußpedalen **FP**



SLH 024 B FP ESP 2HSP ATS

- 4 Abwürfe
- Fußpedalen **FP**
- Abtropfschale **ATS**
- Desinfektionsmittelspender **ESP**
- 2 Handschuhspender **2HSP**

Der RCN Jumbo-Sammler Die SLX-Modelle bieten ein Volumen von 180 Litern pro Abwurf, dadurch können Sie mehr Wäsche pro Abwurf sammeln und sparen dadurch Transportwege und Zeit. Sie sind mit 1 oder 2 Abwürfen erhältlich.



SLX 031 FPX



SLX 032 FPX

Optionen für die SLX-Modelle:

- Deckelöffnung über Fußpedal **FPX**
- Polyester-Wäschesack mit Knebelverschluss **WSWX**
- robuste Schutzhülle aus Sunsüre-Gewebe mit Reißverschluss **WSX**

Die RCN Wäsche- und Abfallsammler



MS 120

der einfache Sammler
für den stationären
Einsatz mit 1 Abwurf

MS 120 R

der fahrbare Sammler
mit 1 Abwurf

MS 240 R FP

der fahrbare Sammler
mit 2 Abwürfen und
Deckelöffnung über
Fußpedal

MS 320 G

der ideale Müllsammler
für den Außenbereich,
mit Haltegriff und
großen Rädern

Die RCN Abfallsammler: die kostengünstige Alternative

Die RCN Abfallsammler mit dem einzigartigen Sack-Befestigungssystem sind mit 1, 2 oder 3 Abwürfen erhältlich und eignen sich ideal für die Wertstofftrennung. Serienmäßig werden sie als stationäre Sammler mit einem Deckel hergestellt und können mit nebenstehenden Optionen ausgestattet werden:

- Deckelöffnung über Fußpedal **FP**
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen **R**
- robuste Schutzhülle aus Sunsire-Gewebe **WSH** (siehe SLX-Modelle)
- Alle Sammler sind mit der Option Kunststoffsack abgebildet **WSK**

Deckelfarben für SLH



weiß gelb rot grün blau

Deckelfarben für SLX



weiß anthrazit

Farben für Wäschesäcke WSW und WSWX




grün blau rot gelb

Farben Sunsire-Gewebe für Schutzhülle WSX und WSH



weiß dunkel-blau blau tauben-blau altrosa laguna gelb konfetti

Farben für Wäschesäcke WSD

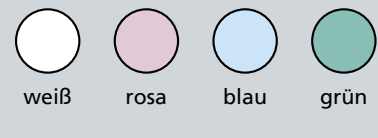

weiß rosa blau grün

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Anzahl der Abwürfe	Fassungsvermögen in Liter/kg
SLH 022 FP ESP HSP ATS	505	995	1240	13,0	2	2 x 120/35
SLH 023 B FP	1000	735	1005	16,0	3	3 x 120/25
SLH 024 B FP ESP 2 HSP ATS	1065	1050	1240	28,0	4	4 x 120/25
SLX 031 FPX	555	555	1000	10,0	1	1 x 180/50
SLX 032 FPX	555	1160	1000	18,0	2	2 x 180/50

MS 120	455	400	915	5,0	1	1 x 120/20
MS 120 R	455	400	1005	7,0	1	1 x 120/20
MS 240 R FP	505	735	1005	12,0	2	2 x 120/20
MS 320 G	560	510	970	8,0	1	1 x 120/20

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Der vielseitige Stations- und Pflegewagen MC 332 S besteht aus einem hoch belastbaren Spezialkunststoff. In Kombination mit der äußerst robusten Bespannung bietet er die perfekte Unterstützung für die täglichen Herausforderungen. Ausgestattet mit einem Koppelsystem, lässt sich der Wagen einfach und schnell mit dem Sammler verbinden.

Die Kunststoff-Edelstahlrollen, jeweils 2 mit Feststeller, ermöglichen ein leichtes Fortbewegen mit besonders großer Wendigkeit.

MC 332 S SPL



MC-Modelle, die vielseitigen Pflegearbeitswagen

HSP der stabile Handschuhspender ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und auf einer Gleitschiene angebracht



HSP

ESP der Desinfektionsmittelspender ist auf einer Gleitschiene angebracht und für 0,5-Liter-Flaschen geeignet (optional auch für 1-Liter-Flaschen). Optional mit Abtropfschale **ATS**



ESP



ATS

serienmäßig: Schiebegriff bei Wagen mit **SPL**



SPL

SPL auszieh- und arretierbare Schreibplatte



serienmäßig: Schiebegriff bei Wagen ohne Option **SPL**

FA aufrollbare Frontabdeckung, Material: atmungsaktiv, abknöpfbar, in 8 Farben erhältlich



FA


KP Koppelsystem, einfach zu bedienendes System zum Koppeln von Wagen und Sammlern



KP

Sammler mit zwei Abwürfen
Deckelöffnung über Fußpedal
Wäschesäcke **WSW**, optional

Fachböden bis 35 kg belastbar, in 3 Größen erhältlich und werkzeuglos herausnehmbar

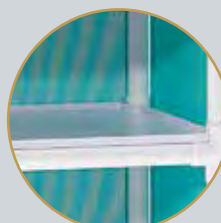

serienmäßig: Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen für besonders große Wendigkeit, 2 mit Feststeller



Ø 100 mm



Ø 75 mm

serienmäßig: Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen zum leichten Fortbewegen, 2 mit Feststeller



MC 231 S

- mit 3 Fachböden der Größe 1
- 1 Abwurf
- Deckelöffnung über Fußpedal **FP**
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- aufrollbare Frontabdeckung **FA**



MC 231 S KP

- mit 3 Fachböden der Größe 1
- 1 Abwurf
- Deckelöffnung über Fußpedal **FP**
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- aufrollbare Frontabdeckung **FA**
- Koppelsystem **KP**



MC 332 S

- mit 3 Fachböden der Größe 2
- 2 Abwürfe
- Deckelöffnung über Fußpedal **FP**
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- aufrollbare Frontabdeckung **FA**
- Schiebegriff
- Koppelsystem **KP**

MC-Modelle, die vielseitigen Pflegearbeitswagen



MC 633 S

- mit 3 Fachböden der Größe 2
- 3 Abwürfe SLH 023 B
- Deckelöffnung über Fußpedal FP
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene ESP
- Handschuhspender auf Gleitschiene HSP
- aufrollbare Frontabdeckung FA
- Schiebegriff
- Koppelsystem KP



MC 642 FP ESP HSP

- mit 4 Fachböden der Größe 2
- beidseitig abknöpfbare Bespannung aus strapazierfähigem Sensure-Gewebe
- 2 Abwürfe
- Deckelöffnung über Fußpedal FP
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene ESP
- Handschuhspender auf Gleitschiene HSP
- aufrollbare Frontabdeckung FA

Farben Sensure-Gewebe für Abdeckung



Farben für Wäschesäcke WSW



Deckelfarben für Sammler



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachabstand	Fachbodennutzfläche	Tragfähigkeit je Fach
MC 231 S	505	1085	1425	27,0	355	410 x 330	30,0
MC 231 S KP	520	1180	1425	37,0	325	410 x 330	30,0
MC 332 S	520	1550	1380	40,0	255 / 325	605 x 500	35,0
MC 633 S	735	1595	1365	45,0	345	605 x 500	35,0
MC 642 FP ESP HSP	705	1155	1610	41,0	275	605 x 500	35,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Der MPC 52 Basic ist das Einstiegsmodell in die Welt der einzigartigen Stations- und Pflegearbeitswagen der MPC-Reihe von RCN. Sie sind qualitativ sehr hochwertig, langlebig und einfach in der Handhabung und

Reinigung. Der MPC 52 Basic hat einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff und einen Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung.

MPC 52 S



Der Pflegearbeitswagen MPC 52 S

HSP der stabile Handschuhspender ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und auf einer Gleitschiene angebracht



HSP

ESP der Desinfektionsmittelspender ist auf einer Gleitschiene angebracht und für 0,5-Liter-Flaschen geeignet (optional auch für 1-Liter-Flaschen)



ESP



ATS


ATS Abtropfschale

TA-52 Vollkunststoffabdeckung zum Schutz der Tischlerwerkstoffplatte, Aufkantung an den Seiten und hinten, werkzeuglos abnehmbar



zwei Drehtüren und zwei Einlegeböden

KP Koppelsystem, einfach zu bedienendes System zum Koppeln von Wagen und Sammlern

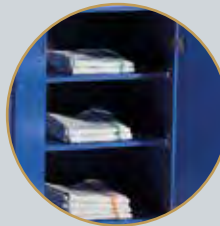

KP

Sammler mit zwei Abwürfen, Deckelöffnung über Fußpedal, selbstentleerende Polyester-Wäschesäcke mit Knebelverschluss **WSW, optional**



WSW, optional

Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau

serienmäßig: Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen zum leichten Fortbewegen, 2 mit Feststeller



Ø 100 mm

serienmäßig: Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen für besonders große Wendigkeit, 2 mit Feststeller



Ø 75 mm



MPC 50 Basic

Der einfache Pflegearbeitswagen ohne Koppelsystem und ohne Sammler.

- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte

Alle Wäschesammler sind mit der Option Wäschesack WSW abgebildet.



MPC 52 Basic

- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau (Wunschfarbe mit Mehrpreis auf Anfrage)
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte

Abbildung ohne Abtropfschale ATS

Deckelfarben für Sammler



Farben für Wäschesäcke WSW





MPC 53 Basic

- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau (Wunschfarbe mit Mehrpreis auf Anfrage)
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 3 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte



MPC 52 B S

- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau
- 2 Schiebegriffe mit Softgrip
- abnehmbare Vollkunststoffabdeckung
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Oberkante Korpus	Nutzfläche Einlegeboden
MPC 50 Basic	525	680	1425	46,0	1060	525 x 440
MPC 52 Basic	525	1540	1425	59,0	1060	525 x 440
MPC 53 Basic	525	1870	1425	64,0	1085	525 x 440
MPC 52 B S	1160	680	1400	61,0	1085	525 x 440

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die einzigartigen Stations- und Pflegearbeitswagen der MPC-Reihe sind nicht nur qualitativ sehr hochwertig und langlebig, sondern auch einfach in der Handhabung und Reinigung. Alle Wagen haben einen Rahmen aus dem RCN Spezialkunststoff, der ein hohes Maß an Stabilität und Robustheit gewährleistet.

Die farbenfrohen Korpusse sind in vielen Farben erhältlich und werden aus 19,6 mm starken HPL-Platten gefertigt. Diese bestehen aus einer 18 mm Pappelsper-

holzträgerplatte, auf die beidseitig die 0,8 mm starke duroplastische Beschichtung unter Hochdruck aufgetragen wurde.

Durch die duroplastische Beschichtung ist der Korpus besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, desinfektionsmittel- und UV-beständig.

MPC 372 S ATS



Der Pflegearbeitswagen MPC 372 S ATS

HSP der stabile Handschuhspender ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und auf einer Gleitschiene angebracht



HSP

ESP der Desinfektionsmittelspender ist auf einer Gleitschiene angebracht und für 0,5-Liter-Flaschen geeignet (optional auch für 1-Liter-Flaschen).



ESP



ATS

Abtropfschale ATS, optional

vertiefter, entnehmbarer Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen



abschließbare Schublade

zwei Drehtüren und ein Einlegeboden

KP Koppelsystem, einfach zu bedienendes System zum Koppeln von Wagen und Sammlern



KP



WSW, optional

Sammler mit zwei Abwürfen
Deckelöffnung über Fußpedal
selbstentleerende Polyester-Wäschesäcke mit Knebelverschluss **WSW, optional**

Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig



serienmäßig: Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen zum leichten Fortbewegen, 2 mit Feststeller



Ø 100 mm

serienmäßig: Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen für besonders große Wendigkeit, 2 mit Feststeller



Ø 75 mm



MPC 370

Der einfache Pflegearbeitswagen

- abschließbare Schublade
- 2 Drehtüren
- höhenverstellbarer Einlegeboden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



MPC 370 ESP HSP ABW

- 20 Liter Kniedruck-Abfallbehälter **ABW**
- abschließbare Schublade
- 2 Drehtüren
- höhenverstellbarer Einlegeboden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Farben für Korpus



laub
grün



enzian
blau



signal
rot



clementine
orange



ginster
gelb



alabaster



frost
weiß

Die Pflegearbeitswagen MPC 370 und MPC 360



MPC 370 ABH

- Abfallbehälter 35 Liter **ABH**
- abschließbare Schublade
- 2 Drehtüren
- höhenverstellbarer Einlegeboden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



MPC 360 ABW

- 20 Liter Kniedruck-Abfallbehälter **ABW**
- Wagen mit abschließbarer Lamellenschiebetür und 2 Einlegeböden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



abschließbare Lamellenschiebetür

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Arbeitsfläche	Nutzfläche Einlegeboden
MPC 370	525	675	1200	40,0	1090	525 x 435
MPC 370 ESP HSP ABW	525	930	1470	45,0	1090	525 x 435
MPC 370 ABH	525	945	1200	45,0	1090	525 x 435
MPC 360 ABW	525	915	1145	43,0	1090	470 x 435

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



MPC 372 S

- Wagen mit abschließbarer Schublade
- 2 Drehtüren
- höhenverstellbarer Einlegeboden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen
- Wäschesammler mit 2 Abwürfen



- Deckelöffnung über Fußpedal
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



MPC 373 S, wie MPC 372 S, nur mit 3 Sammlern

Alle Wäschesammler sind mit der Option Wäschesack WSW abgebildet.

Die Pflegearbeitswagen



MPC 470 ESP HSP

Der Pflegearbeitswagen mit größerem Platzangebot

- abschließbare Schublade
- 2 Drehtüren
- höhenverstellbarer Einlegeboden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte

Farben für Korpus



Deckelfarben für Sammler



Farben für Wäschesäcke WSW und WSWX



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Arbeitsfläche	Nutzfläche Einlegeboden
MPC 372 S	525	1540	1470	49,0	1090	525 x 435
MPC 373 S	525	1540	1470	49,0	1090	525 x 435
MPC 470 ESP HSP	525	930	1470	62,0	1090	780 x 435

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



MPC 472 S

- Wagen mit abschließbarer Schublade
- 2 Drehtüren
- höhenverstellbarer Einlegeboden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen
- Wäschesammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Korpus



Deckelfarben für Sammler



Farben für Wäschesäcke WSW und WSWX



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Arbeitsfläche	Nutzfläche Einlegeboden
MPC 472 S	525	1790	1470	74,0	1090	780 x 435

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die Pflegearbeitswagen



Sonderbau nach Kundenwunsch

- abschließbare Lamellenschiebetür
- Wäschesammler mit 2 Abwürfen
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Emulsionsspender auf Gleitschiene
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Sonderbau nach Kundenwunsch

- 3 Handschuhspender auf Gleitschiene
- Emulsionsspender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Emulsionsspender
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- große Ablagefläche
- abklappbare Schreibplatte
- 4 Schubladen mit Verschluss
- Schiebegriff
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



abklappbare Schreibplatte

HW 300

Der RCN HW 300 wurde speziell als Hygienewagen entwickelt, der platzsparend und unübersehbar durch die rote Signalfarbe im Eingangsbereich, vor einem Isolationszimmer oder im Schleusenbereich positioniert werden kann.



Halterung mit Haken für Arbeitskleidung

Handschuhspender auf Gleitschiene

Desinfektionsmittelspender für 0,5-Liter-Euroflaschen mit Abtropfschale auf Gleitschiene

abschließbare Tür

Korpus aus HPL-Platten in der Signalfarbe Rot



2 Einlegeböden

Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller



Option TH
Tablet-Halterung



Option ABH-10
Abfallbehälter, 10 l




HW 300 und Tablet-Halterung



Option TH Tablet-Halterung

- geeignet für die meisten Tablets mit gängiger Größe
- gefedertes X-Design mit Gummikappen für hohe Haltekraft
- schnelles Lösen des Tablets durch leicht zugängliche Griffe
- kann optimal auf jeden Nutzer eingestellt werden
- Halterung kann werkzeuglos abgenommen werden

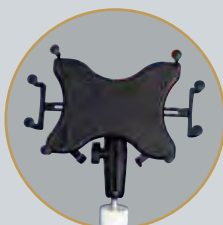

HW 200 ABH-10

- Wagen mit abschließbarer Drehtür und 2 Einlegeböden
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Abfallbehälter, Fassungsvermögen 10 Liter
- Emulsionsspender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Emulsionsspender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Korpus



laub
grün



enzian
blau



signal
rot



clementine
orange



ginster
gelb



alabaster



frost
weiß

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Oberkante Korpus	Nutzfläche Einlegeboden
HW 300	590	450	1710	33,0	1040	380 x 440
HW 200 ABH-10	590	750	1435	33,0	1040	380 x 440

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Alle Transport- und Arbeitswagen sind aus den bewährten RCN Spezialkunststoff-Rahmen gefertigt und haben dadurch eine hohe Stabilität bei geringem

Eigengewicht. Die Ø 100 mm Einradrollen gewähren einen sehr leichten und leisen Lauf. Sie können die Wagen mit praktischen Optionen ausstatten.


MPC 253 AS 50



Optionen:



ESP Desinfektionsmittelspender

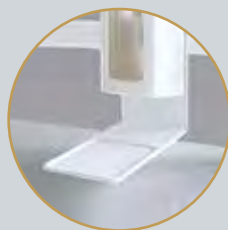

ATS Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender



HSP Handschuhspender



D-HSP Dreifach-Handschuhspender




SPA verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter



WSO portable, ovale Waschschüssel



WS Waschschüssel

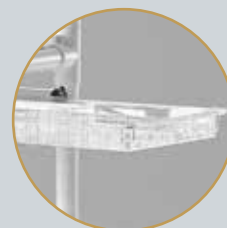

AS ausziehbare Schublade

Transport- und Arbeitswagen



MPC 153

- 3 Fachböden der Größe 1
- Schiebegriff
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller



MPC 153 WSO

wie MPC 153 mit:

- roter, ovaler Waschschüssel inkl. Seifenablage, Waschschüssel wird in den oberen Fachboden eingehängt, 7 Liter Fassungsvermögen



MPC 253

- 3 Fachböden der Größe 2



MPC 353 ESP HSP

- 3 Fachböden der Größe 3
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachbodennutzfläche	Fachbodenabstand	Tragfähigkeit je Fach
MPC 153	440	520	1095	10,0	410 x 330	325	30,0
MPC 153 WSO	440	520	1095	10,5	410 x 330	325	30,0
MPC 253	515	675	1095	12,5	605 x 500	315	35,0
MPC 253 AS 50	515	675	1095	13,0	605 x 500	215 / 315	35,0
MPC 353 ESP HSP	515	930	1360	16,0	860 x 500	315	30,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die praktischen Wäschewagen der MLC-Reihe bieten Ihnen viel Platz und lassen sich auch im vollbeladenen Zustand durch die hochwertigen Einradrollen und den stabilen RCN Spezialkunststoff-Rahmen sehr einfach fort-

bewegen. Die herausnehmbaren Fachböden sind leicht zu reinigen, und die in 8 Farben erhältlichen Abdeckungen bieten Ihnen eine farbenfrohe Abwechslung.

MLC 203




rundum atmungsaktive, aufroll- und abknöpfbare Abdeckung, in 8 Farben zur Auswahl

praktischer Schiebegriff

werkzeuglos herausnehmbare Fachböden, bis 35 kg belastbar, in 3 Größen erhältlich

stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen für einen besonders leichten und ruhigen Lauf, 2 mit Feststeller

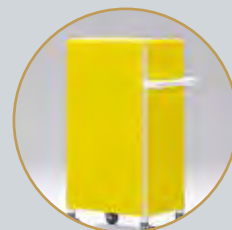

Farben Sunsüre-Gewebe für Abdeckung



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Wäschewagen, Kleider- und Wäschetransporter



MLC 204

- mit 4 Fachböden der Größe 2
- Rundum-Abdeckung
- Schiebegriff



MLC 303

- mit 3 Fachböden der Größe 3
- Rundum-Abdeckung
- Schiebegriff



MLC 304

- mit 4 Fachböden der Größe 3
- Rundum-Abdeckung
- Schiebegriff



LC 503

- Wäschelaster für besonders schwere Wäschemengen
- verstärkte Konstruktion
- mit 3 Fachböden der Größe 5, belastbar jeweils bis 45 kg
- Rundum-Abdeckung
- Schiebegriff links und rechts

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fach- abstand	Fachboden- nutzfläche	Tragfähigkeit je Fach
MLC 203	520	785	1370	20,0	315	605 x 500 / Größe 2	35,0
MLC 204	520	785	1740	24,0	315	605 x 500 / Größe 2	35,0
MLC 303	520	1040	1370	24,0	315	860 x 500 / Größe 3	35,0
MLC 304	520	1040	1740	28,0	315	860 x 500 / Größe 3	35,0
LC 503	520	1410	1640	31,0	410	1080 x 485 / Größe 5	45,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



GR 50

Der RCN Kleidertransporter, ideal zum Transport von hängender Wäsche

- herausnehmbarer Fachboden der Größe 4
- eingebaute Kleiderstange
- rundum atmungsaktive, aufschlag- und abknöpfbare Abdeckung
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte



WB 312

Wäschebutler für den Transport von hängender und kleinteiliger Wäsche. Er erleichtert die Zuordnung und Verteilung von persönlicher Wäsche.

- Schiebegriff links und rechts
- mit 12 Systemboxen
- Modell auch mit 6, **WB 306** oder 18 Boxen, **WB 318** erhältlich
- eingebaute Kleiderstange
- rundum atmungsaktive, aufschlag- und abknöpfbare Abdeckung
- praktischer Schiebegriff links und rechts
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 5 x Ø 125 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Sunsüre-Gewebe für Abdeckung



Farben Systemboxen



Wäschewagen, Kleider- und Wäschetransporter



WT 424 KS

Der RCN Wäschetransporter zum Sortieren und Transportieren gefalteter Wäsche

- Schiebegriff links und rechts
- ausziehbare Kleiderstange **KS**
- mit 24 Systemboxen
- Modell auch mit 18, **WT 418** oder 30 Boxen, **WT 430** erhältlich
- rundum atmungsaktive, aufschlag- und abknöpfbare Abdeckung
- praktischer Schiebegriff links und rechts
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 125 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Länge Kleiderstange	Boxen-zahl	Fachboden-nutzfläche	Boxengröße T x B x H
GR 50	520	1170	1665	22,0	1020	–	1055 x 410	–
WB 312	520	1420	1640	41,0	390	12	–	440 x 285 x 183
WT 424 KS	520	1660	1650	78,0	450	24	–	440 x 285 x 183

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Bestens dokumentiert!

Die vielseitigen und stabilen Dokuwagen gibt es in vielen Ausstattungsvarianten und attraktiven Farben. Alle Modelle sind mit Auszügen bzw. Fächern für eine Hängeregistratur ausgestattet.

Auszüge, Fächer und Einteilung können nach Ihren Wünschen gestaltet werden.



MDC 85 FB

wendiger Dokuwagen

- verschiebbare, abschließbare Schreibplatte
- herausnehmbarer Fachboden FB
- Fach für Hängeregistratur
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- stoßfester RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



verschiebbare,
abschließbare Schreibplatte

festen Korpus aus
HPL-Platten

stoßfester Rahmen
aus RCN Spezialkunststoff

Option: herausnehmbarer
Fachboden FB

4 feststellbare Ø 75 mm Kunst-
stoff-Edelstahl-Doppelradrollen



Die RCN Dokumentationswagen



MDC 95
Dokuwagen

- 2 Auszüge für Hängeregistratur mit Zentralverriegelung
- 1 Utensilienschublade, nicht abschließbar
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- stoßfester RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



MDC 100
Dokuwagen

- verschiebbare, abschließbare Schreibplatte
- Fach für Hängeregistratur
- 3 Utensilienschubladen
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- stoßfester RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Korpus



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Registertiefe	Fachboden-nutzfläche	Schubladengröße T x B x H
MDC 85 FB	555	525	1065	28,0	450	410 x 330	–
MDC 95	545	560	1095	47,0	325	–	475 x 335 x 100
MDC 100	635	570	1065	54,0	530	–	2 x 475 x 345 x 100 475 x 345 x 190

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.


Der Umgang und die Behandlung von Menschen mit MRSA stellt an jede betroffene Einrichtung besondere Herausforderungen. RCN hat hierfür spezielle MRSA-Wagen entwickelt, die Sie bei Bedarf platzsparend, aber gut erkennbar vor einem Isolationszimmer oder im Schleusenbereich positionieren können.

Sie bieten Ihnen Platz zur Aufbewahrung der benötigten Utensilien, wie z.B. Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz

und Handschuhe. Durch die transparenten Schubladen (belastbar bis 8 kg) ist auch bei geschlossener Schublade der Inhalt leicht zu erkennen.

Alle Wagen haben einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff, sind sehr leicht und funktional einsetzbar. Serienmäßig haben alle Wagen Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (2 mit Feststeller) für optimale Mobilität und sicheres Positionieren.

HGW 100 ATS

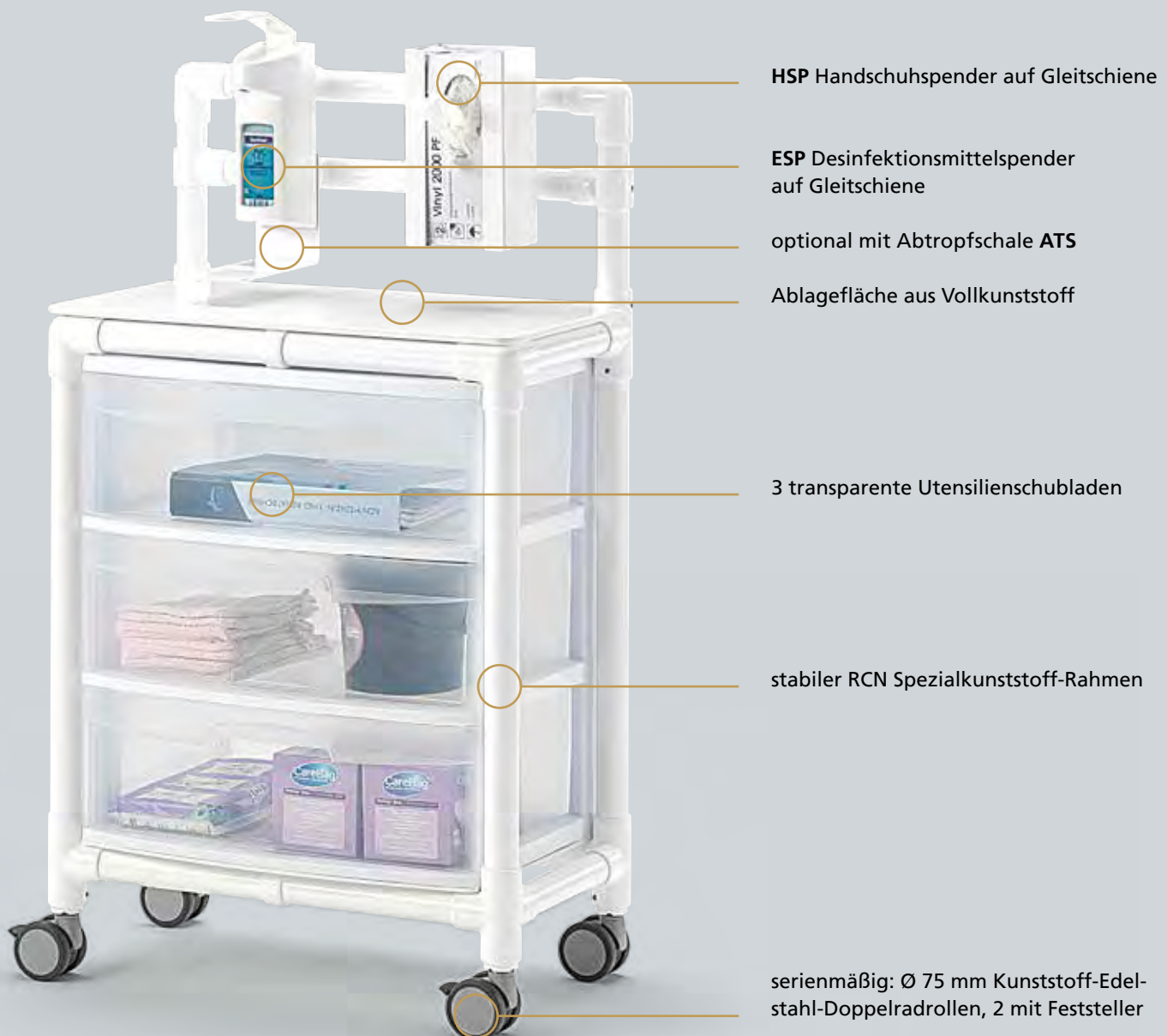

Die MRSA- und Hygienewagen

Bei RCN können Sie den MRSA- und Hygienewagen so zusammenstellen, dass er Ihren Erwartungen entspricht.



HSP der Handschuhspender aus pulverbeschichtetem Aluminium



D-HSP der Dreifach-Handschuhspender



ESP Desinfektionsmittelspender für 0,5-Liter-Flaschen (auf Wunsch 1 Liter)



ATS Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender



ESP-F universeller Halter für 0,5-Liter-Flaschen mit Dosierpumpe auf Gleitschiene



ABH Abfallbehälter mit geteiltem Schwingdeckel und Rollen. Fassungsvermögen 35 Liter




ABH-10 Abfallbehälter mit Deckel und einem Fassungsvermögen von 10 Litern




ABH-S Sensor-Abfalleimer
ABH-SN Sensor-Abfalleimer zum Nachrüsten



ABF Ablagefläche aus Vollkunststoff für KTW 25 und 100: **ABF-K** für HGW 50: **ABF-H**

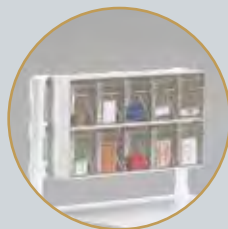

SPS Spritzenschütte mit 10 Fächern für HGW 100

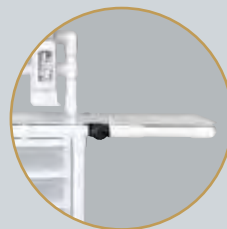

KAF abklappbare Ablegeplatte



SPA verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter



KP Koppelsystem für Wagen und Sammler



TH abnehmbare Tablet-Halterung, geeignet für alle gängigen Tablet-Größen



BEW abnehmbare und gepolsterte Armauflage zur Blutentnahme



Farbige Schubladen auf Anfrage



KTW 25

Kleinteile- und Hygienewagen

- 3 transparente Schubladen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (2 mit Feststeller)
- stabiler Rahmen aus RCN Spezialkunststoff



KTW 25 HS

wie KTW 25 mit

- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-K**



KTW 25 HS ABH-10 ATS

wie KTW 25 HS mit

- Abtropfschale **ATS**
- Abfallbehälter 10 Liter **ABH-10**



KTW 25 HS SPA

wie KTW 25 HS mit

- verstellbarem Halter für Spritzenabwurfbehälter **SPA**

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Auszug T x B x H
KTW 25	385	410	850	–	9,5	3 x 355 x 245 x 175
KTW 25 HS	385	410	1220	855	12,0	3 x 355 x 245 x 175
KTW 25 HS ABH-10 ATS	385	710	1220	855	18,0	3 x 355 x 245 x 175
KTW 100 HS SPA	385	410	1220	855	12,5	3 x 355 x 245 x 175

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die MRSA- und Hygienewagen



KTW 100

Kleinteile- und Hygienewagen

- 4 transparente Schubladen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (2 mit Feststeller)
- stabiler Rahmen aus RCN Spezialkunststoff



KTW 100 HS

wie KTW 100 mit

- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-K**



KTW 100 HS ABH

wie KTW 100 HS mit

- Abfallbehälter 35 Liter **ABH**



KTW 100 HS SPA

wie KTW 100 HS mit

- verstellbarem Halter für Spritzenabwurfbehälter **SPA**

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Auszug T x B x H
KTW 100	385	410	850	850	9,5	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175
KTW 100 HS	385	410	1220	855	12,0	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175
KTW 100 HS ABH	385	710	1220	855	18,0	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175
KTW 100 HS SPA	390	410	1220	855	12,5	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



Durch das Koppelsystem kann an den Wagen zusätzlich ein Sammler angefügt werden. Ohne Werkzeug lassen sich Wagen und Sammler ganz leicht verbinden und auch wieder lösen.



KTLH 521

Der RCN Hygienewagen mit Sammler

- 3 transparente Schubladen Größe 1 und 2 transparente Schubladen Größe 2
- Wagen mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen (2 mit Feststeller)
- stabiler Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene mit Abtropfschale ATS
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- Koppelsystem für Wagen und Sammler, KP
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung ohne abgebildete Inhalte und ohne Kunststoffsack
- Sammler mit 1 Abwurf
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen, 2 mit Feststeller
- Deckelöffnung über Fußpedal

Deckelfarben



weiß

gelb

rot

grün

blau



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Auszug T x B x H	Fassungsvermögen in l
KTLH 521	505	950	1318	955	23,0	3 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175	120
KTW 100 HS ABH-S	505	710	1318	955	18,0	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175	40
KTW 100 BEW	390	835	1185	855	16,0	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175	10

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Die MRSA- und Hygienewagen



KTW 100 HS ABH-S

Der Kleinteile- und Hygienewagen mit Sensor-Abfallbehälter

- mit Infrarot-Sensor
- automatische Öffnungs- und Schließfunktion ohne Kontakt
- Sensorfunktion bei 10-15 cm Abstand
- batteriebetrieben mit 4 x 1,2 V
- mit LED-Funktionsanzeige, auch im Dunkeln gut erkennbar
- Sensor mit An- und Ausschalter, dadurch kann der Deckel auch manuell betätigt werden
- Deckel aus Kunststoff abnehmbar und stoßfest
- Korpus aus Edelstahl
- mit Klemmring für Abfallbeutel
- Behältervolumen 40 Liter



Option ABH-SN

- mit der Option ABH-SN können Sie Ihren vorhandenen RCN Wagen problemlos nachrüsten
- Voraussetzung dafür ist ein Wagen der KTW- oder HGW-Serie mit Ø 75 mm Rollen
- die Option wird durch zwei Verbindungsteile werkzeuglos an den Wagen angehängt
- der Sensor-Abfalleimer kann bei Bedarf ganz einfach und schnell wieder vom Wagen getrennt werden



KTW 100 BEW

Der innovative Blutentnahmewagen:

Ihre Lösung für effiziente und komfortable Blutentnahmen

- abnehmbare und gepolsterte Armauflage
- verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter inkl. Behälter
- Abfallbehälter 10 Liter, ABH-10
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- geschlossener Halter für Hautantiseptikum (max. 0,5-Liter-Flasche)
- abnehmbare Ablagefläche aus Kunststoff mit einseitiger Aufkantung
- 4 transparente Utensilienschubladen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Die MRSA- und Hygienewagen von RCN bieten Ihnen Platz zur Aufbewahrung der benötigten Utensilien, wie z.B. Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Durch die transparenten Schubladen, belastbar bis 8 kg, ist auch bei geschlossener Schublade der Inhalt leicht zu erkennen.

Er hat einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff und ist sehr leicht und funktional einsetzbar.



HGW 50

- 3 transparente Schubladen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- stabiler Rahmen aus RCN Spezialkunststoff



HGW 100 ATS

wie HGW 50 mit

- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-H**
- Abtropfschale **ATS**



HGW 100 ATS ABH-10

wie HGW 100 ATS mit

- Abfallbehälter **ABH-10**

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Größe Auszug T x B x H
HGW 50	410	700	860	16,0	360 x 530 x 165
HGW 100 ATS	410	700	1230	19,0	360 x 530 x 165
HGW 100 ATS ABH-10	410	1000	1230	25,0	360 x 530 x 165

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Hygiene- und Pflegewagen



HGW 100 S

wie HGW 100 ATS ohne ATS, jedoch mit

- Dreifach-Handschuhspender auf Gleitschiene **D-HSP**
- Abfallbehälter 35 Liter **ABH**



HGW 100 SPS

wie HGW 50 mit

- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- Spritzenschütte mit 10 Fächern **SPS**



LTW 200

der großvolumige Transportwagen für leichte Pflege- und Therapieprodukte

- 6 transparente Schubladen



HGW 100 V, Hygienewagen mit Vorhang

wie HGW 100 ATS, jedoch mit

- Vorhang an schwenkbarer, teleskopierbarer Stange
- 3 transparente Utensilienschubladen, auf Wunsch mit farbiger Verblendung vorne
- Dreifach-Handschuhspender auf Gleitschiene

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Größe Auszug T x B x H
HGW 100 S	410	975	1340	26,0	360 x 530 x 165
HGW 100 SPS	570	700	1310	25,0	360 x 530 x 165
LTW 200	410	705	1455	19,0	360 x 530 x 165
HGW 100 V	Nach Konfiguration auf Anfrage				

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

RCN Produktlinie für den MRT-Bereich

Besondere Verfahren benötigen besondere Produkte. Der Bereich des MRT als effektive Form der Diagnostik geht auch mit speziellen Herausforderungen an die involvierte Produktgruppe einher. Dieser Herausforderung stellt sich unser Unternehmen und entwickelt und produziert seit vielen Jahren praxisorientierte, arbeitserleichternde Hilfsmittel für Praxen und Kliniken.

Alle RCN Produkte für den MRT-Bereich werden aus Kunststoff und nicht-magnetischen Metallen wie beispielsweise Messing hergestellt. Deswegen sind sie standardmäßig für den Einsatz in der Umgebung eines MRT mit bis zu 3 Tesla geeignet. Auf Wunsch können wir auch Produkte ausschließlich aus Kunststoff für MRT-Anlagen mit bis zu 7 Tesla herstellen.

Die Merkmale:

Alle RCN-Produkte sind aus hoch belastbaren und wartungsfreundlichen Spezialkunststoffmodulen gefertigt. Dieses Material besitzt die Eigenschaft, sich schnell der Körpertemperatur anzupassen. Zudem ist es hautfreundlich, auf Biokompatibilität geprüft, leicht zu reinigen und entspricht höchsten hygienischen Anforderungen.

**Sonderwünsche erfüllen wir gerne,
sprechen Sie uns an!**



Die besten Produkte für Ihre Anforderungen



DH 49 PA MRT

- ergonomisch geformte Sitzfläche
- geschlossene Polsterauflage aus PUR-Schaum
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla



DH 49 DLR PA MRT

wie DH 49 PA MRT mit

- 4 feststellbaren Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla

Farben PUR-Schaum
für Polsterauflage



graphit



blau



kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Gewicht	Belastbarkeit
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 49 PA MRT	420	420	495	420	420	485	4,7	200
DH 49 DLR PA MRT	520	520	500	420	420	485	6,0	150

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

RCN Produktlinie für den MRT-Bereich



TC 450 MRT

- Polstersitz und -rücken aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- Schiebegriff
- beidseitig schwenkbare Armlehne mit Armpolster aus PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel
- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen mit Feststeller (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla

TC 450 K

wie TC 450 MRT, jedoch

- komplett aus RCN Spezialkunststoff gefertigt, ohne jegliche Metallteile
- Ø 125 mm Vollkunststoff-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- geeignet für MRTs bis 7 Tesla sowie Sicherheitsschleusen (löst keinen Alarm aus)



DR 100 MRT

- Polstersitz und -rücken aus PUR-Schaum
- ausziehbare Fußstütze
- Schiebegriff
- 24"-Greifreifen
- Feststellbremse
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla



Farben PUR-Schaum für Polstersitz, Polsterrücken und Armpolster



graphit



blau



kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkellänge	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
TC 450 MRT	650	550	1125	450	440	570	420	150	21,0
TC 450 K	650	550	1120	450	440	565	390	150	22,0
DR 100 MRT	800	725	1075	450	440	570	400	150	32,0
DR 100 K	855	705	1075	440	475	520	460	120	27,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



Schiebegriff

Polstersitz und Polsterrücken
aus PUR-Schaum in der
Farbe Schwarz

abgewinkelte Armlehnen
mit Polstern aus PUR-Schaum

Kleiderschutz beidseitig

pannensichere
24"-Greifreifen

2 Feststell-
bremsen

klappbare
Fußstütze

Vollkunst-
stoffräder



DR 100 K

Der RCN Transportrollstuhl DR 100 K ist komplett aus RCN Spezialkunststoff und ohne jegliche Metallteile gefertigt. Er eignet sich für alle MRTs und löst auch bei Sicherheitsschleusen an Flughäfen keinen Alarm aus.

- 24"-Greifreifen
- Polstersitz und -rücken aus PUR-Schaum in der Farbe Schwarz
- klappbare Fußstütze
- 2 Feststellbremsen
- Schiebegriff
- abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum
- Kleiderschutz beidseitig
- pannensichere Bereifung
- hoch stabil, belastbar bis 120 kg
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 2 Jahre Garantie



RCN Produktlinie für den MRT-Bereich

Die Kleinteile- und Hygienewagen bieten Ihnen Platz zur Aufbewahrung aller benötigten Utensilien. Auch bei geschlossener Schublade (belastbar bis 8 kg) ist der Inhalt durch die Transparenz leicht zu erkennen.

Alle Wagen haben einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff, sind sehr leicht und funktional einsetzbar und haben 4 x Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen (2 mit Feststeller) für optimale Mobilität und sicheres Positionieren.



KTW 100 MRT

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 4 transparente Schubladen



ESP der Desinfektionsmittelspender ist auf einer Gleitschiene angebracht und für 0,5-Liter-Flaschen geeignet



HSP der stabile Handschuhspender ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und wird auf der Gleitschiene angebracht

Alle Kleinteile- und Hygienewagen sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Auszug TxBxH
KTW 100 MRT	385	410	855	855	9,5	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175
KTW 100 HS MRT	385	410	1220	855	12,5	2 x 355 x 245 x 75 2 x 355 x 245 x 175

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Kleinteile- und Hygienewagen



KTW 100 HS MRT

wie KTW 100 MRT, zusätzlich mit

- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-H**



HGW 100 MRT

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 große, transparente Schubladen
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-H**



HGW 100 SPS MRT

wie HGW 100 MRT ohne HSP und ESP mit

- Spritzenschütte mit 10 Fächern **SPS**



LTW 200 MRT

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 6 große, transparente Schubladen

Alle Kleinteile- und Hygienewagen sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Auszug TxBxH
HGW 100 MRT	410	700	1230	865	19,0	360 x 530 x 165
HGW 100 SPS MRT	570	700	1310	865	25,0	360 x 530 x 165
LTW 200 MRT	410	705	1455	–	19,0	360 x 530 x 165

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



MPC 353 MRT

- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 entnehmbare Fachböden
- Schiebegriff



MPC 153 WSO MRT

- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 vertiefte, entnehmbare Fachböden
- Schiebegriff
- Waschschüssel inkl. Seifenablage, 7 l Fassungsvermögen



IH PH HV MRT

Der stabile Infusionsständer

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- Pumpenhalter PH
- Höhenverstellung HV
- Auch erhältlich als IH MRT ohne Pumpenhalter und ohne Höhenverstellung



Auftritte MRT

- Antirutschstreifen auf der Stehfläche
- rutschfeste Spezialfüße
- belastbar bis 150 kg

AT1 MRT: Auftritt 1-stufig

AT2 MRT: Auftritt 2-stufig



Alle Kleinteile- und Hygienewagen sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.



DES 200

Für die spezielle Röntgenuntersuchung zur Abklärung von Funktionsstörungen des Enddarms bieten wir Stühle an, die im Strahlengang materialfrei sind. Dadurch können



Koppelsystem zwischen Stuhl und Auftritt



Auffanggefäß für Bariumpaste

nen alle Funktionszustände des Mastdarms hochwertig abgebildet werden. Das Auffanggefäß mit Deckel für die Bariumpaste ist ausreichend dimensioniert.



MS 120 MRT

- 1 Abwurf, 15 kg Fassungsvermögen
- Edelstahlbügel als Sackhalter
- Deckel in verschiedenen Farben
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla

Deckelfarben



weiß



gelb



rot



grün



blau

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachabstand	Fachbodennutzfläche	Tragfähigkeit je Fach
MPC 353 MRT	535	930	1075	16,0	315	860 x 500	30
MPC 153 WSO MRT	440	520	1075	10,5	325	410 x 330	30

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit
IH PH HV MRT	660	660	1530-1905	7,0	–
AT 1 MRT	350	400	200	3,0	150
AT 2 MRT	660	400	380	7,5	200

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Sitzhöhe
DES 200	1210	450	1005	22,0	800

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Anzahl der Abwürfe	Fassungsvermögen in Liter/kg
MS 120 MRT	455	400	915	5,0	1	120/20

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



TL 500 S MRT

Die Transportliege mit durchlässiger Auflagefläche aus strapazierfähigem Sunsüre-Gewebe

- beidseitig absenkbare Seitenschutzlehnen
- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, feststellbar (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständige Spezialkunststoff-Konstruktion
- belastbar bis 150 kg
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla




TL 500 S K

wie TL 500 MRT, jedoch

- komplett aus RCN Spezialkunststoff gefertigt, ohne jegliche Metallteile
- Ø 100 mm Vollkunststoff-Doppelradrollen, feststellbar
- geeignet für MRTs bis 7 Tesla



Farben Sunsüre-Gewebe für Auflagefläche bei TL 500 S MRT

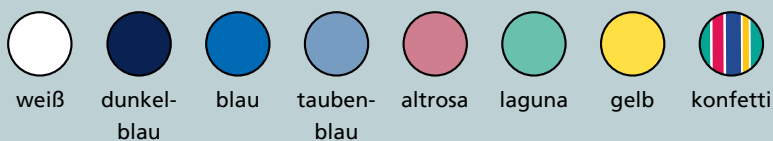

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
TL 500 S MRT	1970	820	940	1860	595	765	150	28,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Transportliegen



TL 600 MRT

Die Multifunktions- und Transportliege mit gepolsterter Liegefläche mit Schaumstoffkern, Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe

- beidseitig abklappbare Seitenschutzlehnen
- 6-fach verstellbares Kopfteil
- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelrollen, feststellbar (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständige Spezialkunststoff-Konstruktion
- belastbar bis 150 kg
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla



Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Auflagefläche bei TL 600 MRT



Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
TL 600 MRT	2010	760	960	1900	630	770	150	48,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



KOMFORT PUR

RPS 480 für mehr Behaglichkeit in der Pflege

Er ist schön anzusehen, ebenso bequem wie funktional und bringt viel Lebensqualität in die Pflege: der Ruhe- und Pflegestuhl RPS 480 von RCN. Sein attraktives Design vermittelt Behaglichkeit und lässt fast vergessen, dass es sich um ein bis ins Detail ausgeklügeltes therapeutisch-medizinisches Möbelstück handelt.

Dank seiner Doppelradrollen ist der RPS 480 mühelos zu verschieben. So kann man die zu pflegende Person ohne Umstände von ihrem Zimmer in andere Räume

Ihrer Einrichtung bringen. Das schafft für die Nutzer trotz aller Einschränkungen ein Stück wohltuende Normalität. Der RPS 480 ist optimal auf die Pflege zugeschnitten und die zu pflegende Person genießt dabei in jedem Moment hohen Komfort und das gute Gefühl, in ihrem neuen Lieblingssessel geborgen zu sein. Unterstützt wird dieses Gefühl durch den kombinierten Schaumstoffkern aus atmungsaktivem Komfort- und AngelFlex-Gelschaumstoff.



- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- stufenlos verstellbare Sitzfläche
- stufenlos verstellbare Beinauflage

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Polster



gelb



rot



blau



grün



anthrazit

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
RPS 480	1100-1680	720	1400	600	480	640	120	60,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Höchste Funktionalität mit viel Komfort.



Optional Therapietisch:
Er wird ganz einfach auf die beiden
Armlehnen aufgeschoben



abnehmbares, höhenstellbares
Kopfkissen



beidseitig ausklappbare Seitenpolster



Schiebegriff

stufenlos verstellbare Rückenlehne

kombinierte Polsterung aus atmungs-
aktivem Komfort- und AngelFlex-Gel-
schaumstoff. Dadurch wird eine optimale
Balance aus sanfter Druckentlastung,
Stützung und Temperatenausgleich ge-
schaffen. Der Bezug aus beschichtetem
Textilgewebe ist abnehmbar und
desinfektionsmittelbeständig



Neigungswinkel der Sitzfläche stufenlos
verstellbar

Armlehnen verstellbar mittels Raster-
einstellung (auch abklappbar)



gewichtsoptimierter, kippsicherer
Edelstahlrahmen

Gasdruckfeder, ermöglicht das leichte,
stufenlose Verstellen der Liegefläche
unabhängig vom Beinpolster



stufenlos verstellbares Beinpolster



4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-
Edelstahl-Doppelradrollen





Paravent: PVGM1 DLRGM

- Paravent Grundmodell 1 (PVGM1):
1,8 m Höhe und 1,0 m Breite
- Grundmodell 1 kann mit Erweiterungsmodell gekoppelt werden
- mit 4 feststellbaren Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (DLRGM)
- Bespannung aus SureCheck®, auf Anfrage auch aus Sunsure-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig



PVGM1 DLRGM mit Erweiterung PVEM DLREM (Abb. rechts)

- H: 1,8 m und 1,0 m
- mit 3 feststellbaren Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (DLREM)
- Bespannung aus SureCheck®, auf Anfrage auch aus Sunsure-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig



Grundmodell mit Erweiterungsmodell gekoppelt



PVGM 2 DLRGM 2

- H: 1,8m und B: 1,8 m
- mit 5 feststellbaren Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (DLREM 2)
- Bespannung aus SureCheck®, auf Anfrage auch aus Sunsure-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig

Farben SureCheck® für Paravent



weiß


blau

rosa

grün

Mobile Hygiene-Stationen

RCN hat eine spezielle Hygiene-Station entwickelt, die platzsparend und unübersehbar durch die rote Signalfarbe im Eingangsbereich, vor einem Isolationszimmer oder im Schleusenbereich positioniert werden kann.

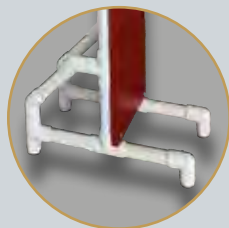

HS 160

- Desinfektionsmittelpender für 0,5-Liter-Euroflaschen **ESP**
- Abtropfschale **ATS**
- Multifunktionshalterung für Handschuhe oder Infomaterial **HSP**
- stabile 19,6 mm HPL-Platte in der Signalfarbe Rot
- Mehrzweckrahmen für DIN-A4-Infoblatt. Der Rahmen kann aufgeklappt werden, um den Inhalt auszutauschen
- hohe Standfestigkeit



HS 80

- Desinfektionsmittelpender für 0,5-Liter-Euroflaschen **ESP**
- Abtropfschale **ATS**
- stabile Montageplatte mit Hinweisschild „STOP“
- hohe Standfestigkeit
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- leicht zu reinigen

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht
HS 160	600	300	1600	15,0
HS 80	545	300	1555	8,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Der mobile RCN Sinneswagen ermöglicht das gezielte Anregen oder Beruhigen der Sinne in unterschiedlichen Räumen. Ob zur Gruppentherapie im Gemeinschaftsraum oder zur individuellen Anwendung direkt im Bewohnerzimmer, mit dem Sinneswagen bringen Sie alle benötigten Utensilien und Geräte sicher an den gewünschten Ort.

Gestalten Sie schnell und einfach eine wohltuende Atmosphäre durch Stimulation der Sinne. Die seitlich angebrachte Wassersäule, die Sinnestücher an der

abnehmbaren und schwenkbaren Halterung sowie die in dem abschließbaren Technikfach untergebrachte Hi-Fi-Anlage, Lichtkugel und Duftvernebler mit Lichteffekten sind in wenigen Sekunden einsatzbereit. Das großzügige Fach mit Einlegeboden und zwei Drehtüren sowie die abschließbare Schublade bietet Ihnen Stauraum für weitere Utensilien.

Technikfach öffnen – gewünschte Geräte ausrichten – Stromstecker einstecken und los geht's ...



Sinneswagen SNW 100 – ein sinnliches Vergnügen

Der RCN Sinneswagen hält, was sein Name verspricht: Riechen, sehen, fühlen, hören – nahezu alle Sinne werden angesprochen. Die sich drehende Lichtkugel mit einem vielfältigen Farbspektrum sowie die sprudelnde, beleuchtete Wassersäule (LED-4-Farbwechsler) sind ein Genuss für die Augen und zaubern eine ganz besondere Atmosphäre im Raum. Mit dem Duftvernebler können

Sie dem Raum – je nach Geschmack – eine frische oder wohlige Note geben. Mit einer hochwertigen Hi-Fi-Anlage können Sie Naturgeräusche, Hörbücher oder Musik abspielen und die jeweils passende Geräuschkulisse erzeugen. Abgerundet wird der Sinneswagen durch einen Halter mit transparenten Sinnestüchern, mit denen Kopf und Körper sanft gestreichelt werden können.



- Der RCN Sinneswagen hat einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff, der ein hohes Maß an Stabilität und Robustheit gewährleistet.
- Der Korpus besteht aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung. Das Material ist besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, UV- und desinfektionsmittelbeständig.
- Dank der Doppelradrollen und des Schiebegriffs lässt er sich leicht manövrieren.



3 Jahre Garantie, ausgenommen Elektrogeräte. 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen.

Farben für Korpus aus HPL-Platten



laub
grün



enzian
blau



signal
rot



clementine
orange



ginster
gelb



alabaster



frost
weiß



Modell	Tiefe	Breite	Höhe Oberkante Halter	Korpus innen (TxBxH)	Schublade innen (TxBxH)	Technikfach innen (TxBxH)	Gewicht
SNW 100	635	1150	1920	490 x 520 x 540	435 x 460 x 110	555 x 520 x 235	72,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

Abkühlung auf Rädern: die mobile Hydration-Station IC 50

Die mobile Hydration-Station von RCN dient der Aufbewahrung und dem Transport von gekühlten Getränken und wirkt so der Dehydration aktiv entgegen.

Durch die besondere Wendigkeit und Mobilität dieser Hydration-Station kann die Verfügbarkeit von Getränken in verschiedenen Räumlichkeiten sichergestellt werden.

Zusätzlich ist die abnehmbare und leicht zu reinigende Bespannung in auffälligen Farben erhältlich, sodass ältere und pflegebedürftige Menschen automatisch

leichter und häufiger an das Trinken erinnert werden. Dies hilft nachweislich dabei, die nötige Flüssigkeitszufuhr zu steigern. Zur besonderen Ausstattung dieser Hydration-Station gehören die integrierte und herausnehmbare Kühlbox mit seitlicher Ablagefläche, ein entnehmbarer Fachboden mit praktisch unterteilten Transportboxen für z. B. Trinkgläser sowie ein großes Fach für Getränkeboxen.

Bestücken Sie unsere praktische Hydration-Station ganz einfach nach Ihren individuellen Bedürfnissen und schon sind Sie besonders für die heißen Sommertage gewappnet.



IC 50

- Kühlbox mit 45 Liter Fassungsvermögen
- 2 seitliche Schiebegriffe
- 1 Fachboden mit 3 Transportboxen für Gläser und Flaschen
- 4 Kunststoff-Stahl-Einradrollen Ø 100 mm, 2 mit Feststeller
- Fach für Getränkeboxen, zur einfachen Entnahme durch Schrägstellung
- atmungsaktive Abdeckung aus Sunsüre-Gewebe, in 8 Farben erhältlich
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie
- Lieferung ohne Inhalte



Kühlbox mit 45 Liter Fassungsvermögen

Der Getränkewagen GTW 200



GTW 200

- bietet Platz für je 2 Getränkekisten pro Ebene
- maximale Kistengröße (B x T): 300 x 400 mm
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen
- Fachboden-Einsatz oben mit 24 Fächern für Gläser und Flaschen, Maschinenreinigung bis 100 °C
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen Ø 75 mm, 2 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung ohne abgebildete Getränkekisten



Farben Sunsüre-Gewebe für Abdeckung IC 50



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Modell	Außenabmessungen			Kühlbox				Fachboden- nutzfläche	Fach- abstand	Tragfähig- keit je Fach	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Fassungsvermögen				
IC 50	520	1145	1760	360	640	370	45 Liter	860 x 500	240	35,0	34,0

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachbodennutzfläche	Belastbarkeit je Fachebene:	Breite der Stellfläche
GTW 200	525	770	1165	22,0	550 x 410	50,0	650

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



RPC 800

Ruhe- und Pflegestuhl mit ergonomisch geformten Polstern, ausschwenkbaren und abnehmbaren Armlehnen sowie 6-fach verstellbarer Rückenlehne und Beinstütze



Optional:
Therapietisch/Servierbrett **RSB**



GSS 800 S

Der RCN Gleitschaukelstuhl GSS 800 S ist das ideale Produkt für unruhige Menschen mit einem starken Bewegungsdrang. Durch die besondere Konstruktion ist eine fließende und nahezu horizontale Schaukelbewegung möglich.

- Sicherheitsbügel
- Armlehnen mit Polster aus PUR-Schaum
- hochklappbare Fußstütze
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- sehr stabil, belastbar bis 120 kg

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster



gelb



rot



blau



grün



anthrazit

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
RPC 800	1040-1680	605	1400	455	490	620	150	32,0
GSS 800 S	900	665	970	450	540	500	120	31,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

**RCN – die beste Adresse für
Qualität, Funktionalität und Service!**

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761 9197-0

Fax 06761 9197-70 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de

Stand 08/2026

