



Wir ziehen an einem Strang

Zuverlässig, schnell und flexibel, mit erstklassigem Service und individueller Beratung stehen wir an Ihrer Seite



Heute bereit für Morgen sein – RCN





Der Duschocker DH 49



Unser Klassiker unter den Duschockern – praktisch und preiswert. Trotz geringem Eigengewicht ist er außerordentlich stabil und belastbar bis 200 kg. Sein ergonomisch geformter Sitz ist sehr angenehm, und die zentrale Pflegeöffnung ermöglicht das komfortable Reinigen der Intimzone.



- sehr stabil und leicht zu reinigen
- zentrale Pflegeöffnung
- ergonomische Sitzfläche
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf den RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl SCC 250 PPG SB

Der Stuhl der SCC 250 Reihe mit der PUR-Polstervariante – die beste Lösung für den Pflegealltag in den Funktionsbereichen Dusche, Toilette und Transport.



- Sicherheitsbügel
- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare und trittstabile Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- abnehmbare Polsterücken aus PUR-Schaum
- Ø75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



*Produkte werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versendet, die Transportzeit der Spedition ist nicht inbegriffen.



Schnelle Lieferung

Kurze Lieferzeiten – bei gesicherter
Materialverfügbarkeit

Der Gehwagen GW 120

Der RCN Gehwagen bietet wie keine andere Gehhilfe dem bewegungseingeschränkten Benutzer Sicherheit beim Gehen. Er wurde speziell für die Mobilisierung und das Bewegungstraining von Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt und ist das ideale Hilfsmittel für sturzgefährdete Personen. Sich jederzeit selbst setzen zu können oder von dem Sicherheitsgurt aufgefangen zu werden, nimmt die

Angst vor folgenschweren Stürzen. Dies wirkt sich positiv auf die Bewegungsbereitschaft und auf das Allgemeinbefinden der Benutzer aus und hilft Fixierungen zu vermeiden.

- Polstersitz aus hygienischem PUR-Schaum
- Rückenbespannung aus Textilene® - Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Doppelaufrollen, Ø 75 mm, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung mit Drehclip, 7 Höhen einstellbar
- praktische Tasche
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Hilfsmittelnummer: 10.46.02.0006



VIDEO



**Produkte werden innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet, die Transportzeit der Spedition ist nicht inbegriffen.



Die höhenverstellbare Edelstahlduschliege UDW 2500 VRW

Die Duschliege UDW 2500 VRW ist das besondere Hilfsmittel zum Duschen und Transportieren von Pflegebedürftigen. Über die beidseitigen Fußpedale ist die Höhe der Liegefläche stufenlos hydraulisch verstellbar.

Die Neigung der Liegefläche lässt sich durch eine Gasdruckfeder positiv und negativ bis zu einer Anti-/Trendelenburg-Lagerung einstellen. Der verschließbare Ablauf gewährleistet einen kontrollierten Wasserablauf. Die Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (4 mit Totalfeststeller)

er) ermöglichen einen sanften und wendigen Transport. Das Rückenteil lässt sich bei Modellen mit der Option **VRW** stufenlos über eine Spindel in der Neigung verstellen.

- Liegefläche mit verstellbarem Rückenteil
- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 490 bis 890 mm
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung
- stufenlos verstellbares Rückenteil **VRW**
- belastbar bis 200 kg
- bis Körpergröße: 1850/2000 mm
- bis Schulterbreite: 620 mm
- garantiert nicht rostend
- **Hilfsmittelnummer: 04.40.03.4009**



**Produkte werden innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet, die Transportzeit der Spedition ist nicht inbegriffen.



Ersatzteile

Gesicherte Ersatzteilversorgung mit
schnellen Lieferzeiten

Der RCN Stuhl für Schwergewichtige SCC 250 XL PPG

Auch für die Pflege schwergewichtiger Menschen hat RCN viel zu bieten. Die beliebten XXL Dusch- und Toilettenstühle von RCN sind standardmäßig in zwei Belastbarkeitsstufen erhältlich. Die Stühle der XL-Reihe sind bis max. 200 kg belastbar und in Sitzbreiten von 50-54 cm erhältlich. Die OS-Reihe beinhaltet Stühle mit einer max. Belastbarkeit von 250 kg bei Sitzbreiten von 56-60 cm. Stühle ab 250 kg bis

400 kg fertigen wir gerne für Sie im Sonderbau und optimal auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt.

- schwenkbare Armlehne
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum in Blau
- abnehmbare Polsterrücken aus PUR-Schaum
- Sitzbreite wählbar von 50-54 cm
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

belastbar bis
200 kg



VIDEO



Aufmaß XL



Arbeitstage**

RCN – die beste Adresse für Qualität,
Funktionalität und Service



Faire Preise

Konstante Preise auch bei steigenden
Materialkosten

Der RCN Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl SCC 250 OS PPG STE

Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl von RCN für Schwergewichtige ist bis zu 250 kg belastbar und das ideale Hilfsmittel für Menschen mit Adipositas. Die Sitzbreite kann von 56 cm bis 60 cm gewählt werden.

- verstärkte schwenkbare Armlehne
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum in Blau
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- Sitzbreite wählbar von 56-60 cm
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 250 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

belastbar bis
250 kg




VIDEO



Arbeitsstage**



**Produkte werden innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet, die Transportzeit der Spedition ist nicht inbegriffen.

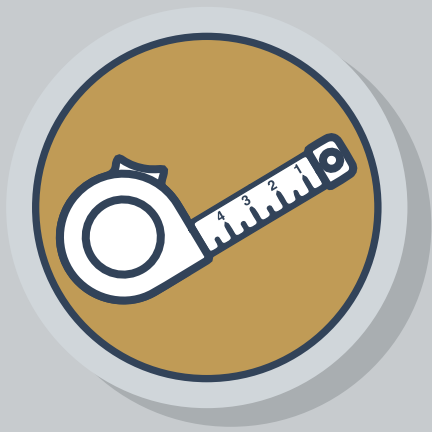

Sondermaße

Wir produzieren im personenspezifischen Sonderbau

Der XXXL-Dusch und Toilettenstuhl im Sonderbau! SCC 250 XXXL 400

Alle XXXL-Dusch- und Toilettenstühle werden im personenspezifischen Sonderbau geplant und optimal an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst.

- geteilte, ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- beidseitig verstärkte, schwenkbare Armlehne
- Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- 2 abnehmbare Polsterrücken aus PUR-Schaum
- Sitztieferweiterung auf 54 cm
- Sitzbreite 80 cm
- 6 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 4 mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- Doppelrahmen aus RCN Spezialkunststoff mit Aluminium verstärkt
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- garantiert nicht rostend
- nicht toilettenüberfahrbar
- hoch stabil, belastbar bis 400 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Aufmaß XXXL



Auf Anfrage
3-4 Wochen

Bei RCN können Sie den Stuhl so zusammenstellen,
dass er Ihren Erwartungen entspricht.

Persönlich

Unsere RCN Außendienstmitarbeiter



Falk Abke
0171 - 9741572
FA@rcn-medizin.de



Dragan Tanaskovic
0171 - 9741578
DT@rcn-medizin.de



Markus Meyer
0171 - 9741570
MM@rcn-medizin.de



Andreas Weber
0171 - 9741573
AW@rcn-medizin.de




Andreas Schulze
0171 - 9741574
AS@rcn-medizin.de



Michael Kiepe
0171 - 9741579
MK@rcn-medizin.de



Michael Kupka
0171 - 9741577
MKU@rcn-medizin.de

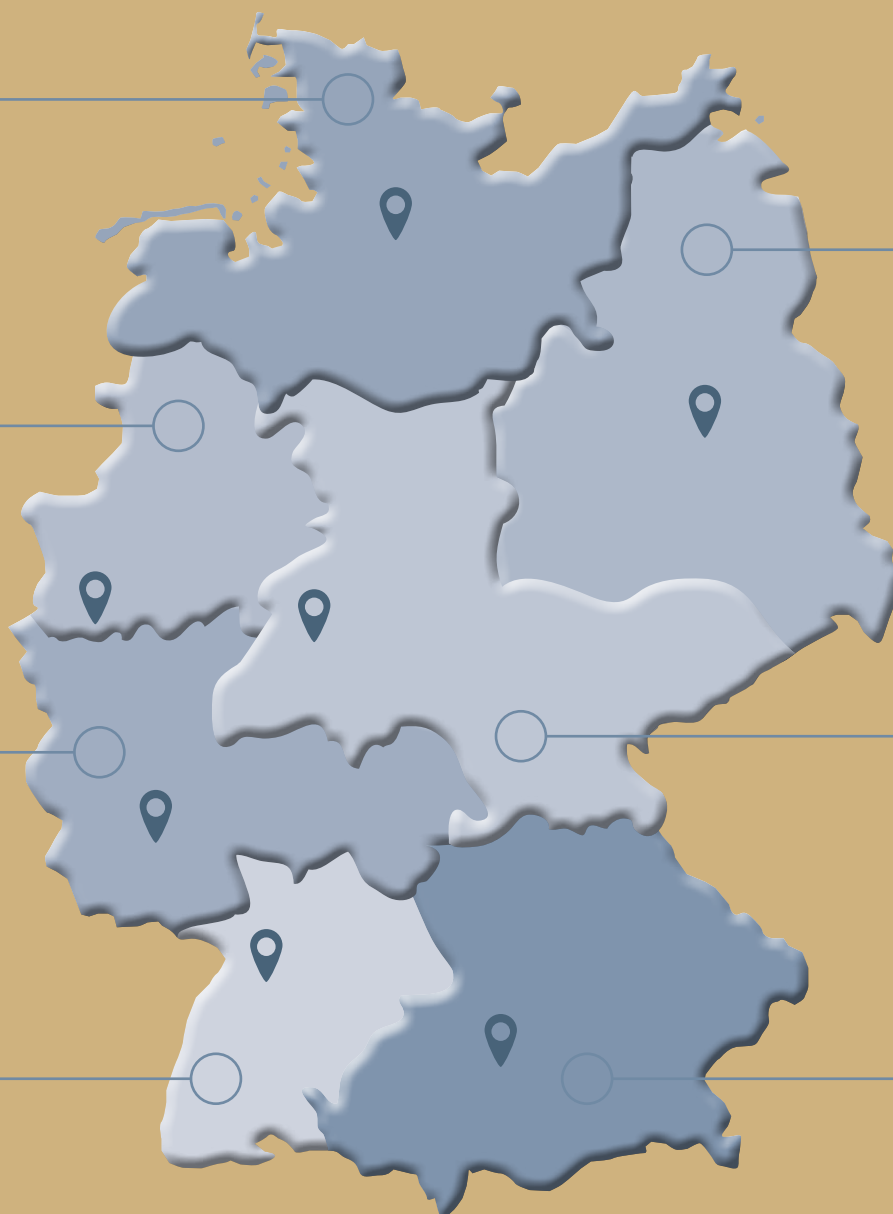

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0

Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de

