

Chariot à médicaments RCN MEW



Un système d'organisation optimisé

Les chariots à médicaments équipés de corbeille de la gamme MEW ne sont pas seulement durables, mais aussi facile à manipuler et à nettoyer. Tous les chariots ont un cadre en résine de synthèse, qui garantit un haut niveau de stabilité et de robustesse.

Le caisson est disponible en 7 coloris. Il est fabriqué à partir de panneaux en RESOPAL®-HPL de 19.6 mm d'épaisseur. Ils sont constitués d'un panneau de 18 mm de contreplaqué, sur lequel a été appliqué sous haute pression et sur les deux faces un revêtement thermodurcissable de 0.8 mm d'épaisseur. Grâce au revêtement thermodurcissable, le caisson est particulièrement hygiénique, résistant à la chaleur, aux rayures, aux produits désinfectants ainsi qu'aux UV.

Les chariots à médicaments de la série MEW présentent les caractéristiques suivantes :

- Cadre en résine de synthèse
- 4 roulettes doubles, diamètre 100 mm en plastique et acier inoxydable (dont 2 avec freins)

En quelques étapes, vous pouvez composer votre chariot à médicaments comme vous le souhaitez :

1. Choisir le modèle de base. Les deux modèles MEW 100 et MEW 200 se différencient par la hauteur intérieure du caisson contenant les corbeilles :
MEW 100: 625 mm
MEW 200:1035 mm
2. Déterminer la taille des corbeilles ISO, ainsi que les séparateurs longitudinaux et transversaux en option aux pages 4 et 5.
3. Ajouter les options souhaitées (page 7)
4. Choisir la couleur de votre caisson.
5. Votre chariot à médicament personnalisé est prêt !

Vous trouverez à la page 6 des chariots à médicaments déjà équipés.

- Caisson en RESOPAL®-HPL
- Tiroir avec fermeture à clés
- Caisson avec corbeilles, et portes battantes avec poignées et fermeture à clés
- Rails de support pour corbeilles
- Plan de travail avec rebords sur les 3 côtés
- Poignée de poussée
- 3 ans de garantie sur les pièces amovibles
- 5 ans de garantie sur le cadre en résine de synthèse



Le chariot à médicaments et ses équipements



Notre sélection - Corbeilles de rangement ISO

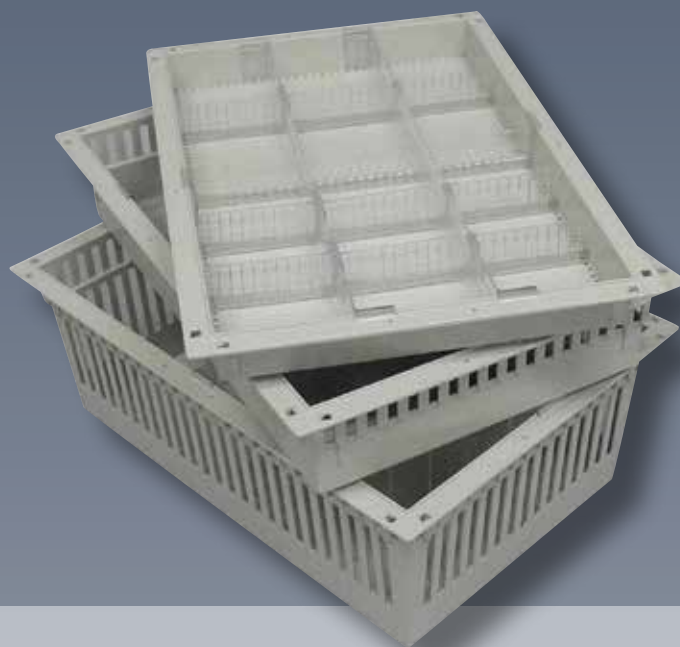
RCN Médical vous propose les éléments suivants pour une configuration optimale dans l'utilisation au quotidien de votre chariot à médicaments.


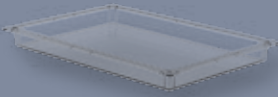
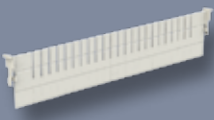

Les corbeilles ISO sont disponibles :

- Dans les hauteurs 50 mm, 100 mm ou 200 mm
- Dans les couleurs gris et transparent
- Avec ou sans séparateurs longitudinaux et transversaux

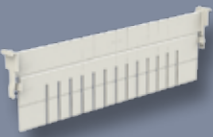
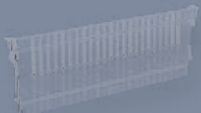
Vous trouverez ci-dessous la hauteur intérieure du caisson selon le modèle correspondant (à prendre en considération lors du choix des corbeilles):

- Modèle MEW 100 : hauteur intérieure 625 mm
- Modèle MEW 200 : hauteur intérieure 1035 mm

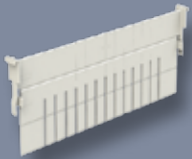
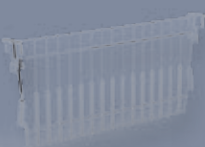


Corbeille ISO 50	Désignation	Couleur	Dimensions (lxPxH en mm)
	Corbeille ISO 50 en plastique ABS	Gris	600 x 400 x 50
	Corbeille ISO 50 en plastique polycarbonate	Transparent	600 x 400 x 50
	Séparateurs longitudinaux / transversaux 50 en plastique ABS pour corbeille ISO 50	Gris	600 x 50 400 x 50
	Séparateurs longitudinaux / transversaux 50 en plastique polycarbonate pour corbeille ISO 50	Transparent	600 x 50 400 x 50

Corbeille ISO 100	Désignation	Couleur	Dimensions (lxPxH en mm)
	Corbeille ISO 100 en plastique ABS	Gris	600 x 400 x 100
	Corbeille ISO 100 en plastique polycarbonate	Transparent	600 x 400 x 100

	Séparateurs longitudinaux / transversaux 100 en plastique ABS pour corbeille ISO 100	Gris	600 x 100 400 x 100
	Séparateurs longitudinaux / transversaux 100 en plastique polycarbonate pour corbeille ISO 100	Transparent	600 x 100 400 x 100

Corbeille ISO 200	Désignation	Couleur	Dimensions (lxPxH en mm)
	Corbeille ISO 200 en plastique ABS	Gris	600 x 400 x 200
	Corbeille ISO 200 en plastique polycarbonate	Transparent	600 x 400 x 200

	Séparateurs longitudinaux / transversaux 200 en plastique ABS pour corbeille ISO 200	Gris	600 x 200 400 x 200
	Séparateurs longitudinaux / transversaux 200 en plastique polycarbonate pour corbeille ISO 200	Transparent	600 x 200 400 x 200

Nos modèles



MEW 100 S

- Cadre en résine de synthèse
- 4 roulettes doubles, Ø 100 mm en plastique et acier inoxydable, donc 2 avec freins
- Caisson en panneaux RESOPAL®-HPL
- Tiroir coulissant avec 2 séparateurs longitudinaux et 4 séparateurs transversaux
- Caisson (hauteur intérieure 625 mm) avec corbeilles, portes battantes avec poignées et fermeture à clés
- Rails de support pour corbeilles ISO
- 2 x corbeilles ISO 50, gris, 600 x 400 x 50 mm avec séparateurs
- 2 x corbeilles ISO 100, gris, 600 x 400 x 100 mm avec séparateurs
- 1 x corbeille ISO 200, gris, 600 x 400 x 200 mm avec séparateurs
- Plan de travail avec rebord sur les 3 côtés
- Poignée de poussée
- Distributeur de désinfectant sur glissière (DMS-F remplace ESP)
- Support DASRI rond SPA (disponible en carré ou rectangulaire)
- Distributeur de boîte à gants HSP
- Garantie 3 ans sur les pièces amovibles
- Garantie 5 ans sur le cadre en résine de synthèse



MEW 200 S

- Cadre en résine de synthèse
- 4 roulettes doubles, Ø 100 mm en plastique et acier inoxydable, donc 2 avec freins
- Caisson en panneaux RESOPAL®-HPL
- Tiroir coulissant avec 2 séparateurs longitudinaux et 4 séparateurs transversaux
- Caisson (hauteur intérieure 1035 mm) avec corbeilles, portes battantes avec poignées et fermeture à clés
- Rails de support pour corbeilles ISO
- 3 x corbeilles ISO 50, gris, 600 x 400 x 50 mm avec séparateurs
- 3 x corbeilles ISO 100, gris, 600 x 400 x 100 mm avec séparateurs
- 2 x corbeilles ISO 200, gris, 600 x 400 x 200 mm avec séparateurs
- Plan de travail avec rebord sur les 3 côtés
- Poignée de poussée
- Distributeur de désinfectant sur glissière (DMS-F remplace ESP)
- Support DASRI rond SPA (disponible en carré ou rectangulaire)
- Distributeur de boîte à gants triple D-HSP
- Tablette rabattable SPL-A
- Garantie 3 ans sur les pièces amovibles
- Garantie 5 ans sur le cadre en résine de synthèse

Options



DMS-F : distributeur de gel hydro alcoolique universel



PANIER : support pour panier de rangement
Dim. l x P x H : 25 x 20 x 10.5 cm



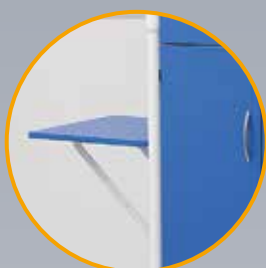
HSP : distributeur de boîte à gants



D-HSP : distributeur de boîte à gants triple



SPA : support DASRI Rond, carré ou rectangulaire



SPL-A : tablette rabattable
Dim. l x P : 40 x 50.5 cm



ABW : poubelle 20 L avec ouverture par le genou



ABH : poubelle 35 L



Compartimentation du tiroir :

Les tiroirs des modèles MEW peuvent être équipés de séparateurs longitudinaux en aluminium et de séparateurs transversaux en plastique polycarbonate.

Les séparateurs longitudinaux sont modulables sur toute la profondeur, les séparateurs transversaux ne divisent toujours qu'un seul compartiment longitudinal.

Surface utile du tiroir : 555 x 435 mm (LxP)

Coloris disponibles pour le caisson :



Vert feuille



Bleu gentiane



Rouge vif



Orange clémentine



Jaune



Albâtre



Blanc neige

Modèle	Profondeur	Largeur	Hauteur	Hauteur du plan de travail	Dimensions du plan de travail (LxP)	Hauteur intérieure du caisson	Poids
MEW 100 S	525	775	1455	1060	615 x 485	625	58
MEW 200 S	525	1000*	1580	1460	615 x 485	1035	85

Dimensions en mm, poids en kg

* avec tablette SPL-A fermée

Sous réserve d'erreurs d'impressions ou de modifications techniques.

Nous vous en offrons d'avantage ...

Visitez notre site web : www.rcn-medical.fr



Chariot de soins MPC 370 ABH



Chariot d'hygiène HGW 100 SPS



Chariot de soins MPC 50 Basic



Chariot à médicaments MEW 75

RCN – la meilleure adresse en matière de qualité, de fonctionnalité et de service !

RCN Médical E.U.R.L

Mobiliers et équipement hospitaliers

Port de Rech · 11C Grand Rue · 57430 Sarralbe

Tél : 03 87 85 60 09 · Fax : 03 87 87 61 93

E-mail : infos@rcn-medical.fr

08/2024

